

Campaign 2013 Summer

さきどり!

電気泳動とフロッピング  
遺伝子導入

セルカウンティング

サンプル定量

イメージング機器

クロマトグラフィー

核酸増幅 / PCR

キャンペーン期間 2013.5.20~7.31

キャンペーン

BIO-RAD

## トランスブロットTurboブロッキングシステム (PVDF, ミニゲル用)

トランスブロットTurboブロッキングシステムにより、より多くのタンパク質をゲルから移動させ、メンブレンの表面でしっかりとキャッチ。しかも最短3分で転写が完了するので、時間がかかるウェスタンブロッティング実験を効率的に行えるようになります。

- ✓ 独自開発の転写用試薬で高効率ブロッキング
- ✓ 独自設計の転写カセットによる均一な転写
- ✓ 最短わずか3分の高速ブロッキング（TGXゲル使用の場合）
- ✓ 電源内蔵なので別途パワーサプライを必要としません


**15%  
OFF**

### Ordering Information

カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格
170-4150J1	トランスブロットTurbo with PVDF (ミニ)	¥280,000	¥238,000

## トランスブロットTurboシステム用 転写パック (バルクパック)

高速・高効率転写・高い再現性を実現したトランスブロットTurboシステムの専用消耗品をお得にご利用いただけます\*。

\*専用消耗品バルクパックのみキャンペーン対象です。


**15%  
OFF**

### Ordering Information

カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格
170-4156B03	トランスブロットTurbo転写パックPVDF (ミニ) 30パック	¥47,500	¥40,000
170-4157B03	トランスブロットTurbo転写パックPVDF (ミディ) 30パック	¥67,000	¥56,000
170-4158B03	トランスブロットTurbo転写パックNC (ミニ) 30パック	¥47,500	¥40,000
170-4159B03	トランスブロットTurbo転写パックNC (ミディ) 30パック	¥67,000	¥56,000

## トランスブロットTurboシステム用 自作用転写キット

転写パックで使用されている転写バッファー、メンブレン、ろ紙のセットです。

別途必要なものはエタノールと超純水だけ。すぐに転写スタックを作成できるReady-To-Assemble (RTA) の転写キットです。

ランニングコストを抑えつつ、転写パックと同等の転写効率を得ることが可能です。

低蛍光PVDFを使えば、Stain Freeゲルによるメンブレン上でのタンパク質のUV可視化への対応、LEDや近赤外光による励起・検出にも対応可能です。

\*トランスブロットTurboシステム専用試薬です。


**15%  
OFF**

### Ordering Information

カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格
170-4270	トランスブロットTurbo用 RTA転写キットNC (ミニ) 40枚分	¥46,000	¥39,100
170-4271	トランスブロットTurbo用 RTA転写キットNC (ミディ) 40枚分	¥66,000	¥56,100
170-4272	トランスブロットTurbo用 RTA転写キットPVDF (ミニ) 40枚分	¥46,000	¥39,100
170-4273	トランスブロットTurbo用 RTA転写キットPVDF (ミディ) 40枚分	¥66,000	¥56,100
170-4274	トランスブロットTurbo用 RTA転写キット低蛍光PVDF (ミニ) 40枚分	¥54,000	¥45,900
170-4275	トランスブロットTurbo用 RTA転写キット低蛍光PVDF (ミディ) 40枚分	¥78,000	¥66,300

高感度で使いやすい

## Clarity Western ECL Substrate

20%  
OFF

Clarity Western ECL Substrateは、高感度で高いシグナル安定性を優れたコストパフォーマンスで実現する、CCDカメラ検出器やX線フィルム検出に最適な化学発光検出用試薬です。

室温保存で1年間安定ですので、室温に戻すなどの使用温度を気にする必要がありません。

## 優れたコストパフォーマンス

Clarityは、ウェスタンブロッティング検出に要するコストを大幅に削減します。他社同等製品と比べ、コストを約1/4に抑えることが可能です。

製品名	容量 (ml)	価格	使用可能面積 (cm <sup>2</sup> )	使用可能メンブレン枚数 (ミニゲルサイズ※)	ミニゲル1枚分のランニングコスト
Clarity Western ECL Substrate	200	¥20,000	2,000	33枚	¥600
Clarity Western ECL Substrate	500	¥40,000	5,000	84枚	¥480
G社 同等製品	100	¥35,400	1,000	16枚	¥2,124
T社 同等製品	100	¥57,000	1,000	16枚	¥3,420
T社 同等製品	103	¥33,000	1,030	16枚	¥1,922
P社 同等製品	130	¥26,000	1,300	21枚	¥1,200

※ミニゲル：60cm<sup>2</sup>相当換算


## 高感度検出

Clarityは低バックグラウンドで、高感度な検出を実現します。

パイオ・ラッド  
“Clarity”



G社 同等製品

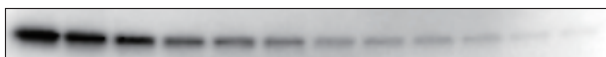

実験条件 サンプル：プレジジョンPlus standard (unstained)  
100倍希釈 (3/4 serial dilution, 10 μl/well)  
電気泳動：Gel / ミニプロティアンTGX (AnyKd 12well)  
Running condition：200VC 30min  
Blotting：トランスブロットTurbo (1.3A, 7min)  
Membrane：PVDF  
Blocking：1% casein in TBS overnight  
HRP-conjugate：StreptTactin HRP (1.5 μl) in TBST (45ml)  
Imaging：ChemiDoc MP (2x2 bin)  
露光時間：60sec

## Ordering Information

カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格
170-5060	Clarity Western ECL Substrate 200ml	¥20,000	¥16,000
170-5061	Clarity Western ECL Substrate 500ml	¥40,000	¥32,000


ウェスタンのサンプル検出と同時にマーカーも検出

## ストレプタクチン-HRP標識

20%  
OFF

2次抗体の反応時にストレプタクチン-HRPを少量加えるだけで、プレジジョンplusスタンダードに特異的に結合し、目的タンパク質のHRPによる検出時に同時に発色または発光させることが可能です。発光強度はストレプタクチン-HRPの希釈率で調節できるので、スタンダードの量を変えることなく簡単に利用できます。

※ストレプタクチン-HRPに対応するスタンダードはプレジジョンPlusスタンダード（未着色）、プレジジョンPlus Western Cスタンダードです。

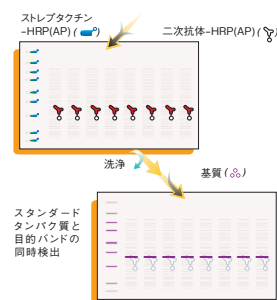

## Ordering Information

カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格
161-0380	ストレプタクチン-HRP標識 0.3ml	¥13,000	¥10,400

同時開催中！ オールラウンド ウェスタン画像撮影解析装置キャンペーン

期間：～ 2013年 9月27日

## Ordering Information

カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格
170-8265CAM4	ChemiDoc XRS Plus Clarity/パッケージ	¥4,020,000	¥2,400,000
170-8265CAM5	ChemiDoc XRS Western Blotting/パッケージ	¥4,327,000	¥2,600,000

約40%  
OFF

## 電気泳動&amp;ウェスタンブロッティングベストパッケージ

バイオ・ラッドが自信を持っておすすめする電気泳動&ウェスタンブロッティングベストパッケージ。  
電気泳動/ウェスタンブロッティングで使用する定番製品を厳選しパッケージ化しました。  
必要な機器・試薬が揃っているので、ご購入後すぐに実験を開始できます。  
お得なパッケージ価格のベストパッケージを、キャンペーン価格でさらにお得にお求めいただけます。



15%  
OFF

用途			
品名	ベストパッケージforトランスブロット Turbo PVDF(MINI)	ベストパッケージforトランスブロット Turbo PVDF(MIDI)	
カタログ番号	170-4150J10	170-4150J11	
キャンペーン価格	¥450,000 → <b>¥382,500</b>	¥465,000 → <b>¥395,200</b>	
電気泳動システム	ミニプロティアンTetra レディーゲルセル 2枚用 (165-8005JA) 	Criterionセル (165-6001) 	
ブロッティング機器	トランスブロットTurboブロッティングシステム (170-4150JA) 		
パワーサプライ	パワーパックBasic (164-5050JA) 		
スタンダード	プレシジョンPlus WesternC プロテインパック (161-0385)		
タンパク質用 サンプルバッファークット	タンパク質用サンプルバッファークット：		
ブロッティング用 バッファークット	プレミックスバッファークット 10XTBS 1L, EIAグレード10% Tween-20 1L		
プレキャストゲル	—		
ゲル作成試薬	—		
染色液	—		
ろ紙	—		
メンブレン	転写パック PVDF(MINI) (170-4156)	転写パック PVDF(MIDI) (170-4157)	
便利ツール・ ガイドブック	プロトエレクロードイングチップ 1000本 ゲルリリーサー		

\*上記の6パッケージがキャンペーン対象です。構成品の変更はできません。



## 電気泳動&amp;ブロットング

電気泳動&ブロットニング ベストパッケージ (TGXゲル用&セミドライ式)	電気泳動&ブロットニング ベストパッケージ (自作ゲル用&セミドライ式)	電気泳動&ブロットニング ベストパッケージ (TGXゲル用&タンク式)	電気泳動&ブロットニング ベストパッケージ (自作ゲル用&タンク式)
164-5052B321	164-5052BBS	164-5052B321T	164-5052BB
¥370,000 → <b>¥314,500</b>	¥460,000 → <b>¥391,000</b>	¥350,000 → <b>¥297,500</b>	¥430,000 → <b>¥365,500</b>
ミニプロティアンTetra レディーゲルセル 2枚用 (165-8005JA) 	ミニプロティアンTetraセル 10well、1mm、2枚用 (165-8003JA) 	ミニプロティアンTetra レディーゲルセル 2枚用 (165-8005JA) 	ミニプロティアンTetraセル 10well、1mm、2枚用 (165-8003JA) 
トランスブロットSDセル (170-3940JA) 	ミニトランスブロットセル (170-3930JA) 		
パワーバック HC (164-5052) 			
プレジジョンPlusデュアルスタンダード (161-0374) プレジジョンPlus WesternCプロテインスタンダード (161-0376)			

Laemmliサンプルバッファー、2-メルカプトエタノール 25ml、プレミックスバッファー 10×トリス/グリシン/SDS 1L

	ブロットイング用サンプルバッファーキット：プレミックスバッファー 10×トリス／グリシン 1L、プレミックスバッファー 10×TBS 1L			
	ミニプロティアンTGXゲル10% 10well、10枚（456-1033）	—	ミニプロティアンTGXゲル10% 10well、10枚（456-1033）	—
	—	ゲル作成試薬：アクリルアミド／ビス 30%溶液 37.5：1 500ml、 SDS 100g、TEMED 5ml、 過硫酸アンモニウム 10g、 1.5 M トリス／HCl pH8.8 1L、 0.5 M トリス／HCl pH6.8 1L	—	ゲル作成試薬：アクリルアミド／ビス 30%溶液 37.5：1 500ml、 SDS 100g、TEMED 5ml、 過硫酸アンモニウム 10g、 1.5 M トリス／HCl pH8.8 1L、 0.5 M トリス／HCl pH6.8 1L
	Bio-Safe CBB G-250 ステイン（161-0786）			
	シート 7×8.4cm 60枚（極厚）（170-3966）		シート 7.5×10.5cm 50枚（厚）（170-3932）	
	イムンブロットPVDFメンブレン（162-0174）			
	便利ツール（特典）：ミニプロティアンゲルリリーサー、AnyGel スタンド Single-row、ブロットイング用ローラー、Criterion染色ブロットイングトレイ 2個 ガイドブック（特典）：ゲル電気泳動ガイド、タンパク質ブロットイングガイド			



幅広い条件設定が可能な安定したブロッキング装置

## タンク式ブロッキング装置

20%  
OFF

低分子から高分子まで、均一な転写を行うならウェットタイプ（タンク式）の転写装置がお勧めです。  
ゲルのサイズや枚数、電極の種類に応じて以下から最適な装置をご選択ください。

### ミニトランスブロットセル

ミニプロティアンTetraと同じバッファー槽を用いたコンパクトな転写装置。  
ミニゲルなら最大2枚の転写が可能です。

### ミニトランスブロットモジュール

ミニプロティアンTetraセルをお持ちなら、ブロットモジュールをご購入いただくと、ミニトランスブロットセルとしてご使用いただけます。

### ミニトランスブロットセル構成


1. フタ付下部バッファー槽
2. バイオアイスクーリングユニット
3. ファイバーパッド
4. ゲルホルダーカセット
5. セントラルコアアセンブリ



### Criterionプレートトランスブロットセル


Criterionワイヤートランスブロットセルの電極をプレート型に変えた装置。より高密度な電場を発生することで均一で迅速な転写が可能。  
Criterionゲルなら1~2枚、ミニゲルなら1~4枚の転写が可能です。

### Criterionプレートブロットセル構成

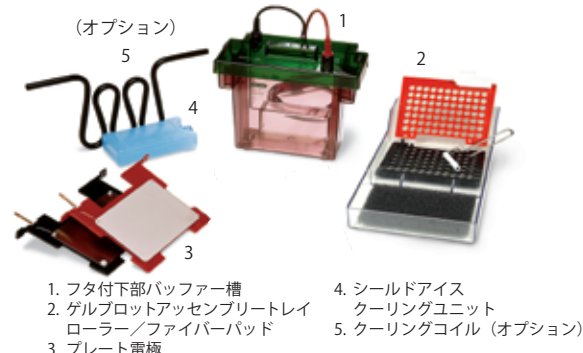

### Criterionアッセンブリートレイで 楽々サンドイッチ作成

- ・ろ紙/メンブレンをバッファーにつけておくスペース (A) と組み立て用スペース (B) が独立
- ・適度な傾斜 (C) で作業スペースが最小限

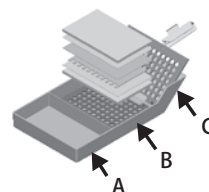

### Ordering Information

カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格
170-3930JA	ミニトランスブロットセル	¥92,000	¥73,600
170-3935JA	ミニトランスブロットモジュール	¥76,000	¥60,800
170-4070JA	Criterionプレートトランスブロットセル	¥115,000	¥92,000

ブロッキング実験には、パワーバックHC、パワーバックUniversal、もしくは高電流タイプのパワーサプライの使用を推奨します。

セミドライブロッキング装置のロングセラー

## トランスブロットSDセル

20%  
OFF

トランスブロットSDセルは、短時間で転写を行うセミドライ式のブロッキング装置です。バッファーに浸したフィルターペーパーの間にゲルとメンブレンをはさみ、水平状態でブロッキングを行います。大量のバッファーを必要としない迅速かつ経済的なブロッキング装置です。

- ☑ 強い電場で短時間で高い転写効率
- ☑ 少量の転写バッファーでエコな転写
- ☑ ミニゲルなら最大4枚同時転写可能
- ☑ ~100kDaのタンパク質の転写に最適

さらに簡便でより転写効率が高いトランスブロットTurboも是非ご検討ください (P1)。



### Ordering Information

カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格
170-3940JA	トランスブロットSDセル	¥135,000	¥108,000

ブロッキング実験には、パワーバックHC、パワーバックUniversal、もしくは高電流タイプのパワーサプライの使用を推奨します。

ミニゲル用電気泳動槽といえばコレ！




## ミニプロティアンTetraセル

20%  
OFF

- ✓1台で同時にミニゲル1~4枚を電気泳動可能
- ✓簡単セットアップ
- ✓プレキャストゲル、自作ゲルともに使用可能
- ✓2枚用Tetraセルにコンパニオンモジュール追加で4枚同時泳動が可能
- ✓ミニトランスブロットモジュールを使用してウェスタンブロットングにも対応

1. ミニプロティアンTetraセル
2. コーム
3. スペーサー付ガラスプレート
4. ショートプレート
5. サンプルローディングガイド

6. キャスティングフレーム
7. キャスティングスタンド
8. キャスティングスタンドガスケット

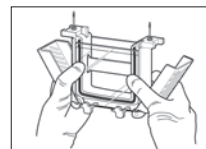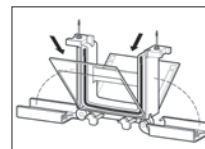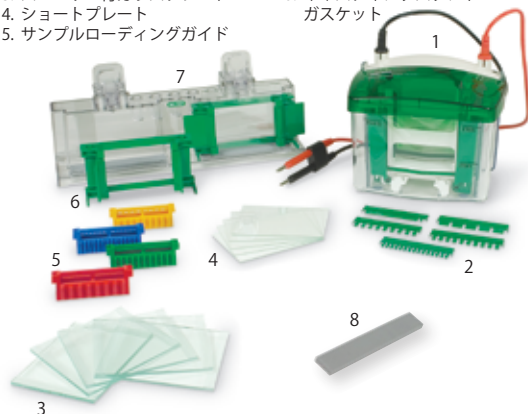

ゲルカセットをセットして、フレームを閉じるだけの簡単セットアップ

## Ordering Information

カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格
165-8002JA	ミニプロティアンTetraセル 10 well, 0.75mm 2枚用	¥95,000	¥76,000
165-8003JA	ミニプロティアンTetraセル 10 well, 1.0mm 2枚用	¥95,000	¥76,000
165-8005JA	ミニプロティアンTetraレーディーゲルセル 2枚用	¥42,000	¥33,600
165-8038	ミニプロティアンTetraコンパニオンランニングモジュール	¥33,000	¥26,400

ミニプロティアンTetraセル(2枚用)には以下の構成が含まれます。  
下部バッファ槽、ケーブル付フタ、電極アッセンブリ、バッファードム、サンプルローディングガイド、コーム(5)、スペーサー付ガラスプレート(5)、ショートガラスプレート(5)、ガスケット付キャストスタンド、キャストフレーム(2)


ミニプロティアンTetraレーディーゲルセル(2枚用)には以下の構成が含まれます。  
下部バッファ槽、ケーブル付フタ、電極アッセンブリ、バッファードム

最大26サンプル／ゲル同時泳動可能なワイドゲル用電気泳動槽といえばコレ！


## Criterionセル

20%  
OFF

- ✓ゲルカセットを差し込むだけの簡単セッティング
- ✓セパレートタイプのバッファ槽でゲル枚数に応じてバッファを節約
- ✓バッファ漏れの心配無し
- ✓可動部が無いからトラブルフリー

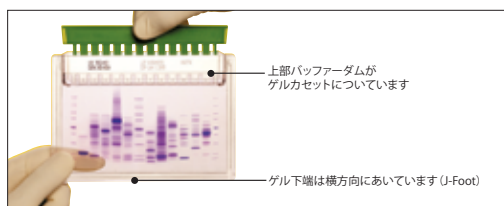

Criterionゲルカセットイメージ

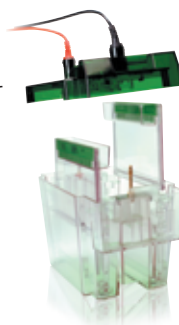

## Ordering Information

カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格
165-6001	Criterionセル	¥60,000	¥48,000
構成内容： 下部バッファ槽、ケーブル付きフタ、 サンプルローディングガイド			

## 使用可能プレキャストゲル

Criterion TGXゲル, Criterion TGX Stain Freeゲル, Criterion XTゲル  
自作ゲル用カセットの取扱いもございます。

## 3ステップでReady-to-Run

- 1.ゲルカセットを差し込む
- 2.バッファ、サンプルを入れる
- 3.フタをしめる

様々な要求に応える簡単操作の定番パワーサプライ

## パワーバックシリーズ

30%  
OFF

電気泳動用パワーサプライ「パワーバック」シリーズは、SDS-PAGEやウェスタンブロットングから、等電点電気泳動などの高電圧が要求されるアプリケーションまで、様々な研究用途に応えます。以下のガイドから最適な機種をご選択ください。

ミニゲル電気泳動なら	プロットングなら	高電圧アプリケーションなら	電気泳動もプロットングも兼ねこなす
パワーバック Basic	パワーバック HC	パワーバック HV	パワーバック Universal
出力範囲 電圧 10-300V 電流 4-400mA 電力 75W (最大)	5-250V 0.01-3.0A 1-300W	20-5,000V 0.01-500mA 1-400W	10-500V 10-2,500mA 1-500W
出力機能 定電圧 定電流	定電圧 定電流 定電力	定電圧 定電流 定電力	定電圧 定電流 定電力

## Ordering Information

カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格
164-5050JA	パワーバック Basic	¥98,000	¥68,600
164-5052	パワーバック HC	¥150,000	¥105,000
164-5056JA	パワーバック HV	¥330,000	¥231,000
164-5070JA	パワーバック Universal	¥250,000	¥175,000



バイオ・ラッドがスタンダード

## プレジジョンPlusスタンダード\*シリーズ

20%  
OFF

プレジジョンPlusプロテインスタンダードは、リコンビナントタンパク質を使用したSDS-PAGE用の分子量スタンダードです。10、15、20、25、37、50、75、100、150、250 kDaの10種類のタンパク質は高純度で、シャープなバンドが得られるように調製されています。

- ✓ シャープなバンドだから分子量測定が容易
- ✓ 色つきだから泳動中もバンドを確認可能（着色済製品）
- ✓ 高分子から低分子まで覚えやすい分子量
- ✓ 75, 50, 25kDaのバンドが太いから簡単に識別可能

**Best In Class** 1本でマルチに使える  
「プレジジョンPlus WesternCスタンダード」

**特長1** 泳動状況の確認に使える

**特長2** 転写状況の確認に使える

ストレプトアクチンHRPを加えて

**特長3** ケミルミ同時検出可能

そのままで

**特長4** 蛍光マルチプレックス検出可能

● プレジジョンPlusスタンダードシリーズ  
ラインアップ

## プレジジョンPlusスタンダード

未着色。バンドが最もシャープに確認できます

## プレジジョンPlusブルースタンダード

全てのバンドが青色に着色済み

## プレジジョンPlusデュアルスタンダード

75, 25kDaのバンドがピンク色に着色済み。その他は青色。より視認性高い

## プレジジョンPlusカレイドスコープスタンダード

10本のバンドが5色に色分け済み。さらにバンド認識が容易


## プレジジョンPlus WesternCスタンダード

着色済みでStrepTactin-HRPによりウェスタンでの検出も可能

## プレジジョンPlusデュアルエクストラスタンダード

デュアルスタンダードにさらに5kDaと2kDaのバンドを追加。

ペプチド領域までカバー

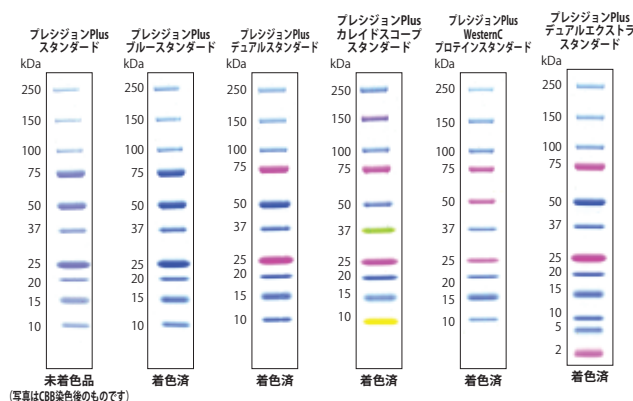

## \*NOTICE TO PURCHASER: LIMITED LICENSE

This product is sold under license from Life Technologies Corporation, Carlsbad, CA for use only by the buyer of the product. The buyer is not authorized to sell or resell this product or its components.

## Ordering Information

カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格
<b>プレジジョンPlusスタンダード</b>			
161-0363	1000 µl	¥18,600	¥14,800
161-0363B02	1000 µl×2本	¥35,000	¥28,000
161-0396	1000 µl×5本 (Value Pack) *	¥79,000	¥63,200
<b>プレジジョンPlusブルースタンダード</b>			
161-0373	500 µl	¥18,600	¥14,800
161-0373B02	500 µl×2本	¥35,000	¥28,000
161-0393	500 µl×5本 (Value Pack) *	¥79,000	¥63,200
<b>プレジジョンPlusデュアルスタンダード</b>			
161-0374	500 µl	¥19,600	¥15,600
161-0374B02	500 µl×2本	¥37,000	¥29,600
161-0394	500 µl×5本 (Value Pack) *	¥83,000	¥66,400

※Value Packは1袋に5本入っています。

## Ordering Information

カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格
<b>プレジジョンPlusカレイドスコープスタンダード</b>			
161-0375	500 µl	¥24,600	¥19,600
161-0375B02	500 µl×2本	¥47,000	¥37,600
161-0395	500 µl×5本 (Value Pack) *	¥104,000	¥83,200
<b>プレジジョンPlus WesternCスタンダード</b>			
161-0376	250 µl	¥19,600	¥15,600
161-0376B02	250 µl×2本	¥37,000	¥29,600
161-0399	250 µl×5本 (Value Pack) *	¥83,000	¥66,400
<b>プレジジョンPlusデュアルエクストラスタンダード</b>			
161-0377	500 µl	¥22,600	¥18,000
161-0377B02	500 µl×2本	¥42,500	¥34,000
161-0397	500 µl×5本 (Value Pack) *	¥95,000	¥76,000



再現性の高い実験に必須

## 電気泳動・ウェスタンブロッティング用プレミックスバッファー

- ✓ バイオ・ラッドの高品質な試薬を使用した高純度プレミックスバッファー
- ✓ 試薬調製の手間を省力化
- ✓ 安定した試薬・バッファーでケラチンのコンタミ無くトラブルフリー

20%  
OFF

## ● 電気泳動用プレミックスバッファー

## 10X トリス/グリシン/SDS

電気泳動用ランニングバッファーを1Lサイズなら10L、5Lサイズなら50L調製できます。

5Lタイプはコック付きなので分注も簡単です。

## 10X トリス/トリシン/SDS

ペプチド電気泳動用ランニングバッファー。10倍に希釈するだけでトリシンランニングバッファーを調製できます。

## ● サンプル処理溶液・バッファーキット

## NEW 4X Laemmli サンプルバッファー

サンプル3容量に対してサンプルバッファーを1容量加えます。これまでのサンプルバッファーよりも濃く調製されているので、より多くのサンプルを電気泳動用に調製できます。(別途、還元剤が必要です)

## タンパク質用サンプルバッファーキット

Laemmli サンプルバッファー\*、2-メルカプトエタノール、10X トリス/グリシン/SDS 泳動バッファー (1L) のセット

## ペプチド用サンプルバッファーキット

トリシンサンプルバッファー、2-メルカプトエタノール、10X トリス/トリシン/SDS 泳動バッファー (1L) のセット

\* 161-0737 Laemmli サンプルバッファー 30mL

## ● ブロッティング用プレミックスバッファー

## トリス/グリシンバッファー

希釈してブロッティングバッファーとして使用できます。SDSやメタノールを別途加え転写効率の調整も可能です。

## PBS バッファー

ブロッティング後のメンブレン処理（ブロッキングや洗浄、抗体反応）のベースバッファーとして使用できます。

## TBS バッファー

PBSと同様に使用できます。NaCl濃度が高くなっているので、非特異的結合をより低減します。

## 10% Tween20

原液では扱いにくいTween20が希釈済みでピペッティングが簡単です。10%に調整されているので濃度計算も簡単です。

## ブロッティングバッファーキット

10X トリス/グリシンバッファー (1L)、10X TBS (1L) のセット

## Ordering Information

カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格
<b>タンパク質電気泳動用バッファー</b>			
161-0732	プレミックスバッファー 10X トリス/グリシン/SDS 1L	¥8,500	¥6,800
161-0732B02	プレミックスバッファー 10X トリス/グリシン/SDS 1L×2本	¥15,000	¥12,000
161-0772	プレミックスバッファー 10X トリス/グリシン/SDS 5L	¥30,000	¥24,000
161-0772B04	プレミックスバッファー 10X トリス/グリシン/SDS 5L×4本	¥93,000	¥74,400
<b>ペプチド電気泳動用バッファー</b>			
161-0744	プレミックスバッファー 10X トリス/トリシン/SDS 1L	¥17,000	¥13,600
<b>サンプル処理溶液・バッファーキット</b>			
161-0710	2-メルカプトエタノール 25mL	¥8,000	¥6,400
161-0747	4X Laemmli サンプルバッファー 10mL	¥6,500	¥5,200
161-0747B02	4X Laemmli サンプルバッファー 10mL×2本	¥12,000	¥9,600
161-0739	トリシンサンプルバッファー 30mL	¥7,500	¥6,000
161-0737J1	タンパク質用サンプルバッファーキット	¥23,000	¥18,400
161-0739J1	ペプチド用サンプルバッファーキット	¥30,000	¥24,000
<b>ブロッティング用バッファー</b>			
161-0734	プレミックスバッファー 10X トリス/グリシン 1L	¥7,500	¥6,000
161-0734B02	プレミックスバッファー 10X トリス/グリシン 1L×2本	¥13,000	¥10,400
161-0771	プレミックスバッファー 10X トリス/グリシン 5L	¥24,000	¥19,200
161-0771B04	プレミックスバッファー 10X トリス/グリシン 5L×4本	¥85,000	¥68,000
170-6435	プレミックスバッファー 10X TBS 1L	¥7,000	¥5,600
161-0780	プレミックスバッファー 10X PBS 1L	¥15,000	¥12,000
161-0780B02	プレミックスバッファー 10X PBS 1L×2本	¥28,000	¥22,400
161-0780B05	プレミックスバッファー 10X PBS 1L×5本	¥59,000	¥47,200
161-0781	EIA グレード10% Tween20 1L	¥8,500	¥6,800
161-0781B02	EIA グレード10% Tween20 1L×2本	¥15,000	¥12,000
<b>ブロッティング用バッファーキット</b>			
161-0734J1	ブロッティング用バッファーキット	¥13,000	¥10,400

## 銀染色の高感度をCBBの手軽さで

(オリオール)

## Oriole蛍光ゲルステイン

Oriole蛍光ゲルステインはUV励起が可能で、SDS-PAGE後のゲルを簡単に高感度に染色ができる蛍光染色剤です。プロトコールは90分間の染色ステップのみで、固定や洗浄、脱色の操作が不要です。

- ✓簡単：プロトコールは【染色】のみ。固定・洗浄・脱色不要
- ✓高速：30分でCBBの感度、90分で銀染色の感度
- ✓高感度：～ngレベルの検出感度で3オーダーの広いダイナミックレンジ
- ✓UV励起：トランスイルミネーターで検出可能
- ✓質量分析（MS）にも対応

## 簡単プロトコールで高感度検出

ゲルを染色液に浸けるだけの1ステップで、固定・洗浄・脱色などの操作は一切不要ですが、銀染色並みの高感度検出を可能にしました。右の表で従来の染色方法と比べてください。

## UVで励起可能

Oriole蛍光ゲルステインの励起にはUVを用いることができるため、検出に特別な装置は必要ありません。

一般的に使用されているUV励起が可能なイメージ解析装置やトランスイルミネーターをお使いいただけます。

励起波長ピーク：270nm、検出波長ピーク：604nm

20%  
OFF

Oriole蛍光ゲルステインによる染色



シルバーステインプラスキットによる染色



## SDS-PAGEスタンダード（161-0317）中のOvalbuminバンドの染色

SDS-PAGEスタンダードを2倍希釈し電気泳動を行い、Oriole蛍光ゲルステイン、またはシルバーステインキットで染色を行った。Oriole蛍光ゲルステインによる染色は、シルバーステインプラスキットと同感度であることが確認された（赤枠）。

	Oriole	銀	SYPRO RUBY	CBB
プロトコール	染色	洗浄	固定 1	染色
		固定	(固定2)	脱色
		染色		
		洗浄	洗浄	
		現像		
		停止		
		洗浄		
染色ステップ	1	7	4	2
操作時間	～90分	90分～	240分～	120分～
感度	～ng	～ng	～ng	数十ng
試薬調製	無し <sup>*1</sup>	都度	無し	無し
廃棄 <sup>*2</sup>	容易	難	容易	容易

<sup>\*1</sup> Oriole5Lキットのみメタノール希釈が必要です

<sup>\*2</sup> 廃棄方法・基準は施設・自治体により異なります

## Ordering Information

カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格
161-0495	Oriole蛍光ゲルステイン 200mL	¥5,000	¥4,000
161-0496	Oriole蛍光ゲルステイン 1L	¥20,000	¥16,000
161-0497	Oriole蛍光ゲルステイン 5Lキット	¥80,000	¥64,000

※ミニゲル一枚あたり、50mlを使用します。


## 酢酸・メタノールを使わない安全なCBB染色液

## Bio-Safe CBBステイン

20%  
OFF

- ✓酢酸・メタノール不要
- ✓ゲルが収縮しない
- ✓Ready-To-Useですぐに使用可能
- ✓S/N比が高いから高感度（数十ng）

Bio-Safe CBB G-250

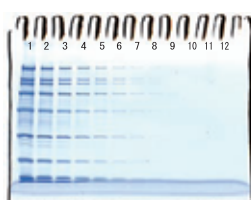

F社製 CBB 染色液



SDS-PAGEスタンダード(Broad)を20倍希釈し、各10μlアプライ。同じ条件で泳動および染色を行った。

## ミニゲル1枚のプロトコール

SDS-PAGE	
精製水による洗浄	200ml×5分×3回
染色	事前調製不要 50ml×1時間～×1回
精製水による脱色	200ml×30分～×1回

## Ordering Information

カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格
161-0786	Bio-Safe CBB G-250ステイン 1L	¥16,000	¥12,800
161-0786B02	Bio-Safe CBB G-250ステイン 1L×2	¥30,000	¥24,000
161-0787	Bio-Safe CBB G-250ステイン 5L	¥55,000	¥44,000

真のハイスループット & 高い再現性の2次元電気泳動を実現する等電点電気泳動装置

## プロティアン i12 IEF 7cm用システム

25%  
OFF

プロティアンi12 IEFシステムは、12レーン独立制御機能を備えた、真のハイスループットと高い再現性を実現するIPGストリップ用等電点電気泳動装置です。

### ● プロティアン i12 IEFシステム

#### 12レーン独立制御型IPGストリップ泳動装置

- ☑ 一度の実験で複数の条件検討が可能
- ☑ 複数の実験系を一度に分離が可能
- ☑ より精度の高い再現性のある実験結果
- ☑ pHレンジの違うIPGストリップも同時に泳動が可能

#### タッチスクリーン装備

簡単操作でRun条件のセットアップやプロトコール作成が可能です。



(11cm, 17cm用トレイ類は含まれません)

### Ordering Information

カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格
164-6000J2	プロティアンi12 IEF 7cmシステム	¥2,450,000	¥1,837,500

Best in Classの最高性能をお届けします。

## C1000 Touchサーマルサイクラー

29-32%  
OFF

- ✓ブロック交換可能：96well Fast、96Deep well、2×48well Fast、384well
- ✓温度グラジエント機能搭載：96well/2×48wellは8段階、384wellは16段階
- ✓8.5インチカラータッチパネル液晶搭載
- ✓高速温度制御5.0℃/秒（96well Fast）
- ✓再現性を確保する卓越した温度均一性：±0.4℃（10秒）
- ✓USBでプロトコル転送可能
- ✓C1000 TouchからS1000をコントロール可能



## 1000シリーズリアクションモジュール

リアクションモジュール				
	96well Fast リアクションモジュール	96Deep well リアクションモジュール	2×48well リアクションモジュール	384well リアクションモジュール
サンプル数	96×0.2mlチューブ 96well プレート	96×0.2mlチューブ 48×0.5mlチューブ 96well プレート	2×48×0.2mlチューブ 2×49well プレート	384well プレート
サンプル容量	10~50 µl	10~125 µl	10~50 µl	3~30 µl
最大温度制御速度	5.0℃/sec	2.5℃/sec	4.0℃/sec	2.5℃/sec
温度制御範囲	0~100℃			
温度正確性	±0.2℃			
温度均一性	±0.4℃（設定温度到達後、10秒以内）			



C1000 Touchプロトコル編集画面

## Ordering Information

カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格	割引率
<b>C1000 Touchサーマルサイクラー</b>				
185-1148JA	C1000 Touchサーマルサイクラー + 2×48well Fast リアクションモジュール	¥1,350,000	¥950,000	30%
185-1196JA	C1000 Touchサーマルサイクラー + 96well Fast リアクションモジュール	¥1,250,000	¥850,000	32%
185-1197JA	C1000 Touchサーマルサイクラー + 96 Deep well リアクションモジュール	¥1,250,000	¥850,000	32%
185-1138JA	C1000 Touchサーマルサイクラー + 384well リアクションモジュール	¥1,400,000	¥1,000,000	29%

増設・PTC200からの買換えに最適です。


## S1000シリーズサーマルサイクラー

25-26%  
OFF

- ✓ブロック交換可能：96well Fast、96Deep well、2×48well Fast、384well
- ✓温度グラジエント機能搭載：96well/2×48wellは8段階、384wellは16段階
- ✓C1000もしくはC1000 Touchからコントロール可能
- ✓PTC200と同じメニュー構成
- ✓PTC200エミュレーションモード搭載



C1000にS1000を最大3台までUSBケーブルで接続して、C1000の大画面からS1000をコントロールすることが可能です。

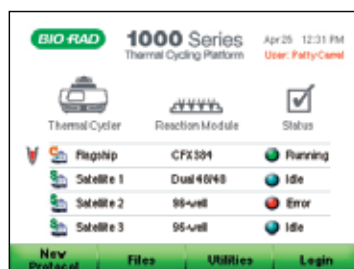

S1000をC1000に接続した際のC1000の画面



## Ordering Information

カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格	割引率
<b>S1000サーマルサイクラー</b>				
185-2148JA	S1000サーマルサイクラー + 2×48well Fast リアクションモジュール	¥950,000	¥700,000	26%
185-2196JA	S1000サーマルサイクラー + 96well Fast リアクションモジュール	¥850,000	¥640,000	25%
185-2197JA	S1000サーマルサイクラー + 96Deep well リアクションモジュール	¥850,000	¥640,000	25%
185-2138JA	S1000サーマルサイクラー + 384well リアクションモジュール	¥1,000,000	¥750,000	25%


# T100サーマルサイクラー1,000台突破記念キャンペーン

期間：2013年4月8日～2013年7月31日

パーソナルサーマルサイクラーの決定版 選ばれています！  
発売より2年弱で国内累計販売台数1,000台超！

## T100サーマルサイクラー

- ・国内販売台数1,000台の実績
- ・5.7インチカラータッチスクリーン
- ・直感的な操作が可能な画面
- ・大き目の操作ボタン、テンキーによる快適な操作
- ・Fast-Protocolにも対応する最大温度制御速度4℃/秒
- ・96well×0.2ml対応、8段階の温度グラジエント機能搭載

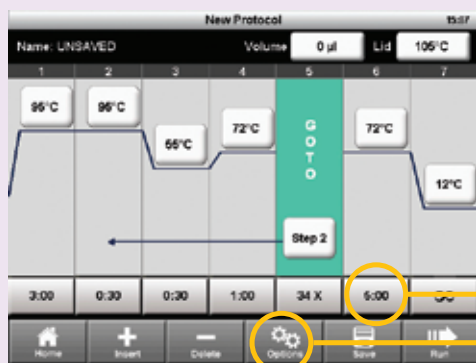

T100 New Protocol画面




T100 時間入力画面

時間入力画面ではテンキーが表示され、簡単に入力が可能です。さらにHoldを設定する場合には左下の「∞」キーを押すことにより簡単に設定することができます。また温度設定時も同様にテンキー入力で簡単に入力していただけです。



T100 Options設定画面

温度グラジエントの設定はチェックボックスをタッチして、上限と下限の温度を入力するだけで設定ができます。

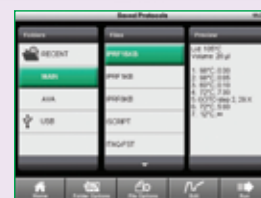

T100 Saved Protocols画面

直近に使用した20プロトコルは「RECENT」フォルダからアクセスすることが可能なため、頻繁に使用するプロトコルを探す必要はありません。3ペインで構成された画面はプロトコルを選択すると右端にプロトコル内容が表示されますので、プロトコルを確認するのみにファイルを開く手間は必要はありません。

### Ordering Information

カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格	割引率
186-1096J1	T100サーマルサイクラー	¥580,000	¥470,000	19%
買い替えに最適 複数台パッケージでお得です。				
186-1096B02	T100サーマルサイクラー 2台	¥890,000		
186-1096B03	T100サーマルサイクラー 3台	¥1,310,000		
186-1096B04	T100サーマルサイクラー 4台	¥1,730,000		
186-1096B05	T100サーマルサイクラー 5台	¥2,150,000		

こちらの製品は  
キャンペーン対象外です。

# CFX Connect リアルタイムPCR解析システムキャンペーン

期間：2013年4月8日～2013年7月31日

## CFX Connect リアルタイムPCR解析システム

- ・96ウェル2波長検出
- ・最適波長のLEDによる高感度な蛍光検出&メンテナンスフリー
- ・光学シャトルによる正確かつ高感度な蛍光検出
- ・特許取得のMass-reduceブロックによる優れた温度制御（最大5℃/秒）
- ・直感的なソフトウェア

28%  
OFF



約10万円試薬  
消耗品つき

### Ordering Information

カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格	割引率
185-5201J1CAM	CFX ConnectリアルタイムPCR解析システム	¥3,950,000	¥2,850,000	28%




だから、速くて早い！新世代リアルタイムPCR試薬

(ソーファースト)


## SsoFast Supermixシリーズ

- ✓高速：特許技術Sso7d融合DNAポリメラーゼによる高速・短時間リアルタイムPCR
- ✓多様なサンプルに対応：一般的に増幅が困難なサンプルでも増幅が可能
- ✓低コピーサンプルでもばらつきの少ない増幅を実現
- ✓コンタミ防止のために、1mlチューブ単位でご提供
- ✓インターカレーション法では“SsoAdvanced SYBR Green Supermix”もしくは“SsoFast EvaGreen Supermix”が選択可能
- ✓プローブ法では“SsoFast Probes Supermix”

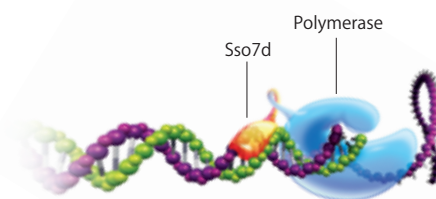

## 特許技術「Sso7d」が実現する高速リアルタイムPCR

DNA結合タンパク質である**Sso7d**がポリメラーゼに融合したSsoFastシリーズでは、PCR中に鋳型DNAにポリメラーゼが強く結合し、伸長反応の間、DNAポリメラーゼが鋳型DNAから脱落することを防ぎます。このため、PCR中に鋳型DNAからの脱落と再会合を繰り返して伸長反応が進む一般的なポリメラーゼよりも高速に増幅することが可能になっています。

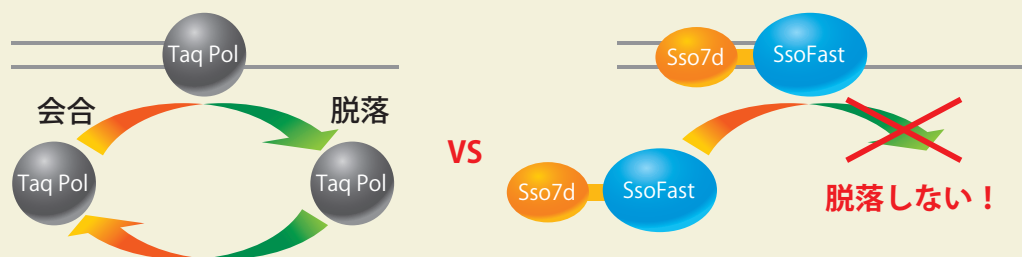

DNAポリメラーゼのPCR反応中の模式図(左)とSsoFastポリメラーゼの反応模式図(右)

## SsoFast Supermixシリーズ 選択ガイド

	色素	特長	製品名
インターカレーション色素検出	色素: SYBRGreen	ROX無	高速/低阻害性/高感度 プロトコル最適化の必要なし/ iQシリーズリアルタイムPCRシステムにも対応/
	色素: EvaGreen	ROX*無	高速/低阻害性/高感度
		ROX有	高速/低阻害性/高感度/適合機種を広さ
プローブ検出		ROX無	高速/低阻害性
		ROX有	高速/低阻害性/適合機種を広さ

\* ROX passive reference 色素 (カタログ番号: 172-5858)

リアルタイムPCRシステムの中には、蛍光信号を標準化し、ウェル間の光学的ばらつきを補正するための内部標準色素が必要なシステムもあります。ROX passive reference色素を用いれば、ROXを必要とするリアルタイムPCRシステムでROX無のPCR試薬を使用することができます。

高速・低阻害性・高感度！ 更に、高速／標準プロトコルの両方に対応！

(ソー アドバンスト)

## SsoAdvanced SYBR Green Supermix

40%  
OFF

Bio-Radの特許技術であるSso7d融合ポリメラーゼにより、高速かつ、多様サンプルを使用した高感度なリアルタイムPCRを実現することができます。標準プロトコルにも対応しているため、お使いのプロトコルを変更する必要がありません。

✓高速：特許技術Sso7d融合DNAポリメラーゼによる高速・短時間リアルタイムPCR

✓多様なサンプルに対応：一般的に増幅が困難なサンプルでも増幅が可能

✓高感度：蛍光が立ち上がるサイクル数が早い

✓高速／標準プロトコルの両方に対応

✓FITCを含むため、Bio-Rad製 iQシリーズリアルタイムPCRシステム

(MyiQ2, iQ5, iCycler iQ, MyiQ) にも対応


### 適合機種

CFX96, CFX96 Touch, CFX384, CFX 384 Touch, CFX Connect, MiniOpticon, MyiQ2, iQ5, iCycler iQ, MyiQ, Opticon, Opticon2, Chromo4

Life Technologies(Applied Biosystems) StepOne, StepOne Plus, Roche LightCycler480, Eppendorf Mastercycler ep realplexシリーズ, QIAGEN (Corbett) Rotor-Gene Q, Takara Dice Real Time System

### Ordering Information

カタログ番号	品名	価格	キャンペーン価格
172-5260	SsoAdvanced SYBR Green Supermix 2ml (20 $\mu$ l $\times$ 200反応)	¥25,000	¥15,000
172-5261	SsoAdvanced SYBR Green Supermix 5ml (20 $\mu$ l $\times$ 500反応)	¥55,000	¥33,000
172-5261B02	SsoAdvanced SYBR Green Supermix 10ml (20 $\mu$ l $\times$ 1,000反応)	¥98,000	¥58,800
172-5261B05	SsoAdvanced SYBR Green Supermix 25ml (20 $\mu$ l $\times$ 2,500反応)	¥230,000	¥138,000
172-5261B10	SsoAdvanced SYBR Green Supermix 50ml (20 $\mu$ l $\times$ 5,000反応)	¥450,000	¥270,000

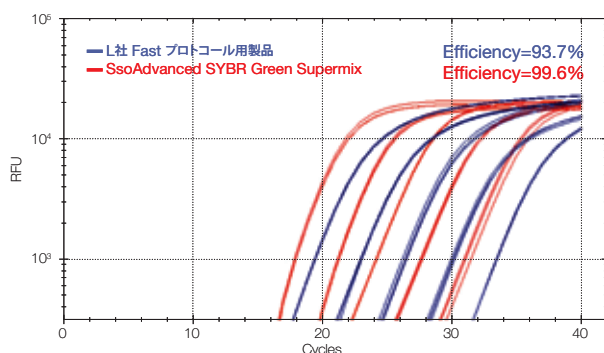


#### SsoAdvancedとL社製品の、L社推奨プロトコルにおける比較

L社 Fastプロトコル用製品: Efficiency = 93.7%,  $R^2 = 1.000$

SsoAdvanced SYBR Green Supermix: Efficiency = 99.6%,  $R^2 = 0.999$

20ng~2pgのHuman cDNAに対して  $\beta$ -actin遺伝子の検出を行った。解析にはCFX96リアルタイムPCR解析システムを用いた。

プロトコル: 初期熱変性 95°C 20秒、熱変性/アニーリング・伸長反応 95°C 3秒/60°C 30秒  $\times$  40サイクル

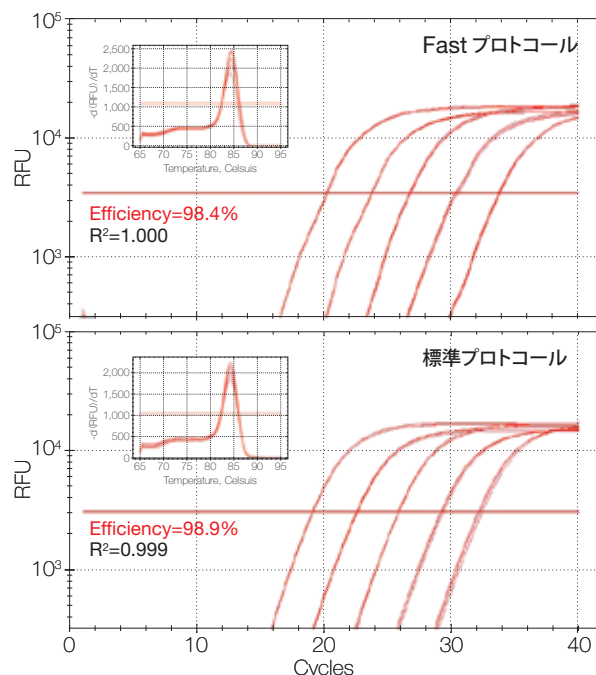

#### SsoAdvancedのFastプロトコル／標準プロトコルにおける比較

Fastプロトコル:

Efficiency = 98.4%,  $R^2 = 1.000$

標準プロトコル:

Efficiency = 98.9%,  $R^2 = 0.999$

20ng~2pgのHuman cDNAに対して  $\beta$ -actin遺伝子の検出を行った。解析にはCFX96リアルタイムPCR解析システムを用いた。プロトコルは、下表を参照。

**SsoAdvanced SYBR Green Supermixは、異なるプロトコルでも安定して、増幅効率が良い反応を実現できる**

	温度・保持時間		サイクル数
	初期熱変性	熱変性/アニーリング・伸長反応	
Fastプロトコル	95°C 30秒	95°C 1秒/60°C 1秒	40サイクル
標準プロトコル	95°C 3分	95°C 10秒/60°C 30秒	40サイクル

本当に知りたい低コピー域でもバラつかない – 高速&amp;低阻害性&amp;高感度

(ソー ファースト エヴァ グリーン)  
**SsoFast™ EvaGreen Supermix**

20%  
OFF

Bio-Radの特許技術であるSso7d融合ポリメラーゼにより、高速かつ、多様サンプル・低コピーサンプルを使用したリアルタイムPCRを実現することができます。

また、検出にEvaGreen色素を使用しており、高感度な検出が可能です。

- ✓ 高速：特許技術Sso7d融合DNAポリメラーゼによる高速・短時間リアルタイムPCR
- ✓ 多様なサンプルに対応：一般的に増幅が困難なサンプルでも増幅が可能
- ✓ 低コピーサンプルでもばらつきの少ない増幅を実現
- ✓ 高感度：SYBR Green Iと同じ励起/蛍光波長で高い信号を実現
- ✓ 最新アプリケーションHigh-Resolution Melt(HRM)に対応
- ✓ 待望のROX入り登場
- ✓ コンタミ防止のため、1mlチューブ単位でご提供

### 特許技術「Sso7d」が実現する高速リアルタイムPCR

SsoFastシリーズ共通のSso7dテクノロジーにより、鋳型DNAから脱落することなく伸長します。(13ページ) これにより高速なPCR反応を実現(下表：プロトコル参照)しています。また鋳型DNAと結合するSso7dテクノロジーは増幅しづらいサンプルでも効率的な増幅を可能とするため、サンプルを選ばずリアルタイムPCRを行うことができます。

SsoFast EvaGreen Supermixでの標準プロトコル(CFX96の例)


ステップ	温度	保持時間	サイクル数
酵素活性化/初期熱変性	95~98℃	30秒	1
熱変性	95~98℃	1~5秒	30~40
アニーリング/伸長反応	60~65℃	1~5秒	30~40
融解曲線	65~95℃ (+0.5℃/step)	2~5秒/step	1

### 第三世代蛍光物質が実現する“高感度検出”


新世代の蛍光物質EvaGreenはSYBR Green I 同様のインターカレーション色素でありながら、SYBR Green I よりも著しく高い蛍光強度が得られます。(右図) また、励起/測定波長はSYBR Greenと同一波長が使用可能であるため、多くのリアルタイムPCR装置でご利用いただけます。

### Sso7d技術とEvaGreenが実現した性能

Sso7dテクノロジーと第三世代蛍光物質“EvaGreen”の組み合わせにより、低コピーサンプルをより正確に定量することが可能になりました。(下図) また、1塩基の違いを融解曲線で検出するアプリケーションHRM (High-Resolution Melt) を行うことが可能です。

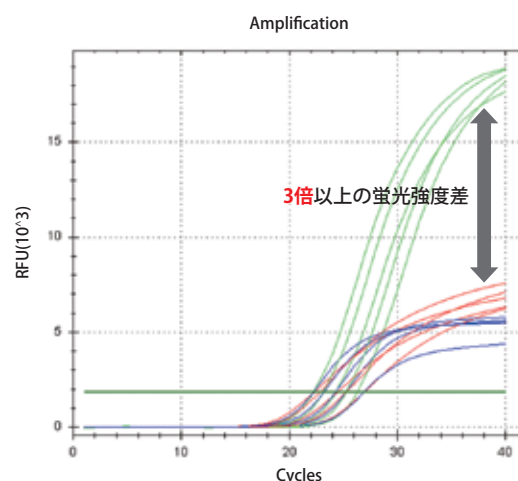

各社のリアルタイムPCR用試薬による蛍光強度比較  
 緑色：Bio-Rad SsoFast EvaGreen Supermix、  
 赤色：A社Fast SYBR、青色：T社 SYBR  
 他社のSYBR採用2製品より高い蛍光強度を誇ります。

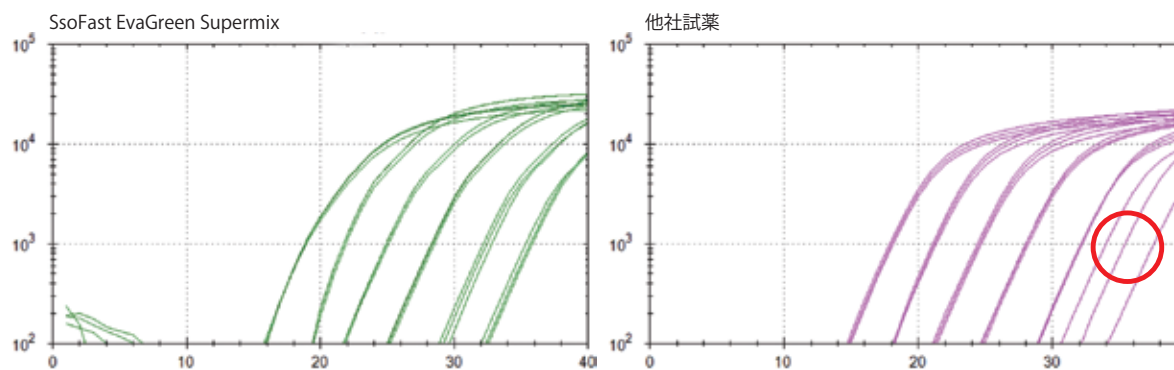

SsoFast EvaGreen と他社試薬での低コピー域の比較

左図：SsoFast EvaGreen Supermixを用いた増幅結果。Efficiency=102%,  $R^2=0.997$ , 反応時間39分  
 右図：他社FastリアルタイムPCR Supermixを用いた増幅結果。Efficiency=90.5%,  $R^2=0.979$ , 反応時間50分  
 右図では赤丸の部分でバラツキが見られるが左図のSsoFastではバラツキなく均一に増幅している。

## 適合機種

## SsoFast EvaGreen Supermix

CFX96, CFX96 Touch, CFX384, CFX 384 Touch, CFX Connect, MiniOpticon, Opticon, Opticon2, Chromo4  
Life Technologies(Applied Biosystems) StepOne, StepOne Plus  
Roche LightCycler480

Eppendorf Mastercycler ep realplexシリーズ

QIAGEN (Corbett) Rotor-Gene Q, Takara Dice Real Time System

## SsoFast EvaGreen Supermix With Low ROX

上記機種に加え、Life Technologies(Applied Biosystems) 7500, 7500Fast, Agilent(Stratagene)Mxシリーズ

## Ordering Information

カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格
<b>SsoFast EvaGreen Supermix (ROXなし)</b>			
172-5200	SsoFast EvaGreen Supermix 2ml (20 $\mu$ l $\times$ 200反応)	¥28,000	<b>¥22,400</b>
172-5201	SsoFast EvaGreen Supermix 5ml (20 $\mu$ l $\times$ 500反応)	¥55,000	<b>¥44,000</b>
172-5201B02	SsoFast EvaGreen Supermix 10ml (20 $\mu$ l $\times$ 1,000反応)	¥98,000	<b>¥78,400</b>
172-5201B04	SsoFast EvaGreen Supermix 20ml (20 $\mu$ l $\times$ 2,000反応)	¥178,000	<b>¥142,400</b>
172-5203	SsoFast EvaGreen Supermix 20ml (20 $\mu$ l $\times$ 2,000反応) ボトル	¥140,000	<b>¥112,000</b>
<b>SsoFast EvaGreen Supermix with Low ROX (ROXあり)</b>			
172-5210	SsoFast EvaGreen Supermix with Low ROX 2ml (20 $\mu$ l $\times$ 200反応)	¥29,000	<b>¥23,200</b>
172-5210B02	SsoFast EvaGreen Supermix with Low ROX 4ml (20 $\mu$ l $\times$ 400反応)	¥55,000	<b>¥44,000</b>
172-5210B05	SsoFast EvaGreen Supermix with Low ROX 10ml (20 $\mu$ l $\times$ 1,000反応)	¥118,000	<b>¥94,400</b>
172-5210B10	SsoFast EvaGreen Supermix with Low ROX 20ml (20 $\mu$ l $\times$ 2,000反応)	¥208,000	<b>¥166,400</b>

## お使いのケミストリでFast-リアルタイムPCRを実現

## SsoFast Probes Supermix

20% OFF


## ✓ プローブ法対応

1-probe (Single-plex)、2-probe (Duplex) 共に、正確な増幅を実現します。また、当製品は極めて優れた再現性を有します。

## ✓ 高速

## ✓ 多様なサンプルに対応

## ✓ 低コピーサンプルでもばらつきのない増幅

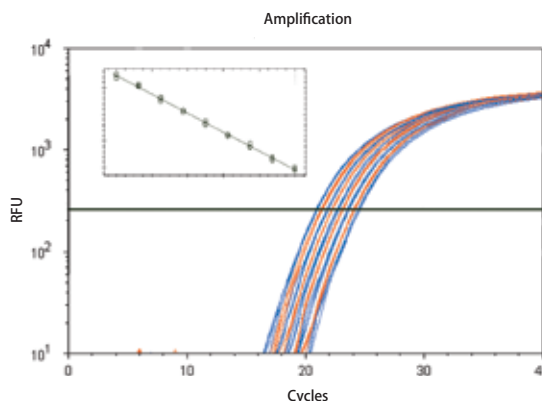

SsoFast Probe Supermixにより極めて優れた再現性が得られる  
CFX384リアルタイムPCR解析システムを用いて、鋳型DNAを1.33倍に段階希釈することで、効率的な判別と信頼性の高い測定が可能であることが示されている。  
ヒトcDNA (1ng~100pg) からGAPDH遺伝子を増幅した。検出はHEX標識プローブを用いた。Efficiency: 91.5% R<sup>2</sup>=0.997

## 適合機種

## SsoFast Probes Supermix

CFX96, CFX96 Touch, CFX384, CFX 384 Touch, CFX Connect, MiniOpticon, MyiQ2, iQ5, iCycler iQ, MyiQ, Opticon, Opticon2, Chromo4, Life Technologies(Applied Biosystems) StepOne, StepOne Plus, Roche LightCycler480, Agilent (Stratagene) Mx3000P, Mx3005P  
Eppendorf Mastercycler ep realplex, QIAGEN (Corbett) Rotor-Gene Q, Takara Dice Real Time System

## SsoFast Probes Supermix with ROX

Life Technologies(Applied Biosystems) 7900HT, 7900HT Fast

## Ordering Information

カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格
<b>SsoFast Probes Supermix (ROXなし)</b>			
172-5230	SsoFast Probes Supermix 2ml (20 $\mu$ l $\times$ 200反応)	¥27,000	<b>¥21,600</b>
172-5230B02	SsoFast Probes Supermix 4ml (20 $\mu$ l $\times$ 400反応)	¥48,500	<b>¥38,800</b>
172-5230B05	SsoFast Probes Supermix 10ml (20 $\mu$ l $\times$ 1,000反応)	¥99,500	<b>¥79,600</b>
172-5230B10	SsoFast Probes Supermix 20ml (20 $\mu$ l $\times$ 2,000反応)	¥178,000	<b>¥142,400</b>
<b>SsoFast Probes Supermix with ROX (ROXあり)</b>			
172-5250	SsoFast Probes Supermix with ROX 2ml (20 $\mu$ l $\times$ 200反応)	¥27,000	<b>¥21,600</b>
172-5250B02	SsoFast Probes Supermix with ROX 4ml (20 $\mu$ l $\times$ 400反応)	¥48,500	<b>¥38,800</b>
172-5250B05	SsoFast Probes Supermix with ROX 10ml (20 $\mu$ l $\times$ 1,000反応)	¥99,500	<b>¥79,600</b>
172-5250B10	SsoFast Probes Supermix with ROX 20ml (20 $\mu$ l $\times$ 2,000反応)	¥188,000	<b>¥150,400</b>

## ROX対応機種専用試薬

## iTaQ™ Universal SYBR® Green Supermix

30%  
OFF

全てのROX対応機種 &amp; お使いのSYBRプロトコルで、高感度なリアルタイムPCRを実現できます。



- ☑ ROX対応機種専用
- ☑ 高感度
- ☑ プロトコル最適化の必要なし

## 適合機種

Life Technologies (Applied Biosystems) ViiA 7, StepOne, StepOnePlus, 7900HT Fast, 7900HT, 7500 Fast, 7500, 7300, 7700, 7000, QuantStudio

## iTaQ Universal SYBR Green Supermix

## L社製品A

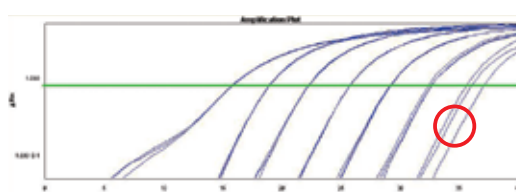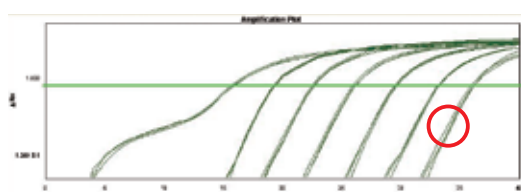

iTaQ Universal SYBR Green Supermixは、L社製品と比較して、Cq値は同等であり、低濃度域でのばらつきが少ない。

— : iTaq Universal SYBR Green Supermix, — : L社製品A

Hela cDNAからβ-actin遺伝子を増幅した。

解析にはLife Technologies社 (Applied Biosystems) 7900HT リアルタイムPCRシステムを使用した。

iTaQ Universal SYBR Green Supermix: Efficiency=96.4%, R<sup>2</sup>=0.999, L社製品A: Efficiency=96.6%, R<sup>2</sup>=0.998

## Ordering Information

カタログ番号	品名	価格	キャンペーン価格
172-5120	iTaQ Universal SYBR Green Supermix (20 μl×200反応)	¥20,000	¥14,000
172-5121	iTaQ Universal SYBR Green Supermix (20 μl×500反応)	¥44,000	¥30,800
172-5121B02	iTaQ Universal SYBR Green Supermix (20 μl×1,000反応)	¥78,000	¥54,600
172-5121B05	iTaQ Universal SYBR Green Supermix (20 μl×2,500反応)	¥184,000	¥128,800
172-5121B10	iTaQ Universal SYBR Green Supermix (20 μl×5,000反応)	¥360,000	¥252,000

## ROX対応機種専用試薬 (プローブ法対応)

## iTaQ™ Universal Probes Supermix

30%  
OFF

- ☑ ROX対応機種専用
- ☑ 高感度
- ☑ プロトコル最適化の必要なし
- ☑ Probe法対応

## 適合機種

Life Technologies (Applied Biosystems) ViiA 7, StepOne, StepOnePlus, 7900HT Fast, 7900HT, 7500 Fast, 7500, 7300, 7700, 7000, QuantStudio

## Ordering Information

カタログ番号	品名	価格	キャンペーン価格
172-5130	iTaQ Universal Probes Supermix (20 μl×200反応)	¥23,000	¥16,100
172-5131	iTaQ Universal Probes Supermix (20 μl×500反応)	¥48,000	¥33,600
172-5131B02	iTaQ Universal Probes Supermix (20 μl×1,000反応)	¥85,000	¥59,500
172-5131B05	iTaQ Universal Probes Supermix (20 μl×2,500反応)	¥195,000	¥136,500
172-5131B10	iTaQ Universal Probes Supermix (20 μl×5,000反応)	¥360,000	¥252,000



クロマチン構造を迅速に評価！

## EpiQ Chromatin Analysisキット

40%  
OFF

細胞におけるクロマチン構造を定量的に評価するための、新しいエピジェネティクス研究ツールです。

## ☑培養細胞でのクロマチン構造の迅速評価が可能



当キットを用いて得られるクロマチン構造に関する定量評価結果は、遺伝子発現レベルと高相関性を示します。

また、6時間未満と短時間でアッセイ結果を得ることができます。(従来のクロマチン沈降法では数日間を要します)

## ☑少量の細胞数で解析可能

解析に必要な細胞数は、 $5 \times 10^4$ 程度と極めて少量です。

## EpiQクロマチン解析の流れ

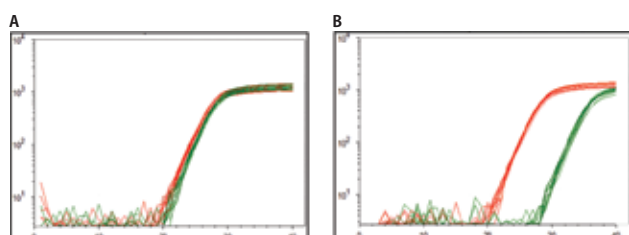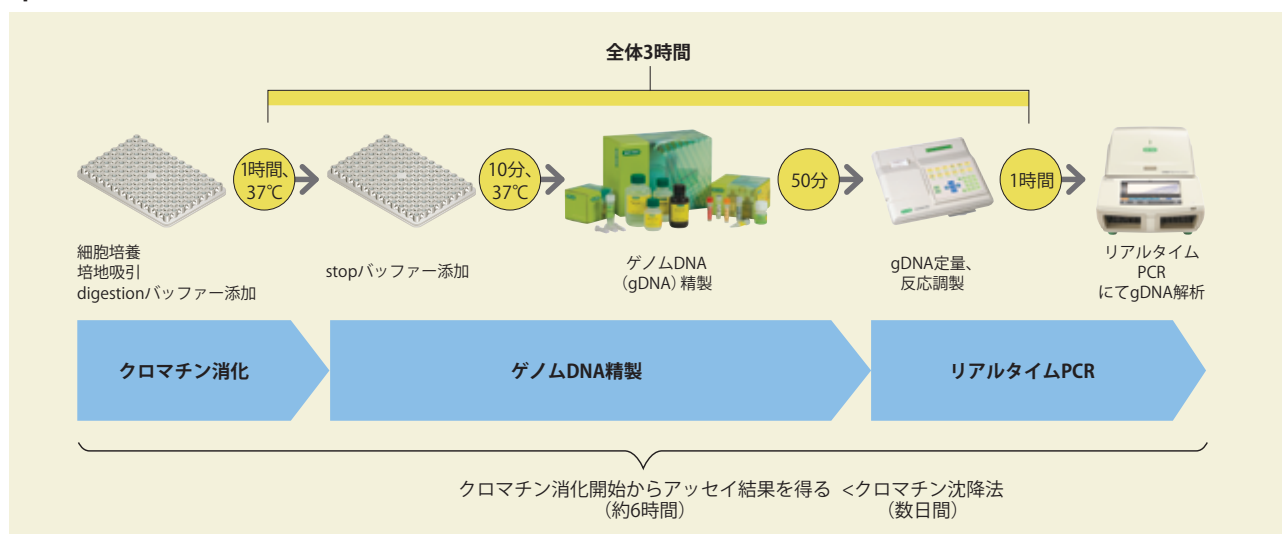


**EpiQ Chromatin Analysisキットによるユー／ヘテロクロマチン領域の測定結果例**  
ヌクレアーゼのアクセシビリティを利用して開いている領域と閉じているクロマチン領域を区別。

HeLa細胞中のエピジェネティクスの発現していないHBB (リファレンス) 遺伝子と構成的に発現しているGAPDH (目的遺伝子) 遺伝子の近傍プロモーター領域を、CFX96リアルタイムPCR解析システムとEpiQキットおよびEpiQ Chromatin SYBR Green Supermixを使用して増幅を実施した。

A: 「閉じている」ヘテロクロマチン領域に関しては、ヌクレアーゼ処理の前後でサイクル(Cq)遅れが生じなかった。(Cq=0.58)

B: 「開いている」ユークロマチン領域に関しては、ヌクレアーゼ処理後に大きなCq遅れ(Cq=8.08)が見られた。

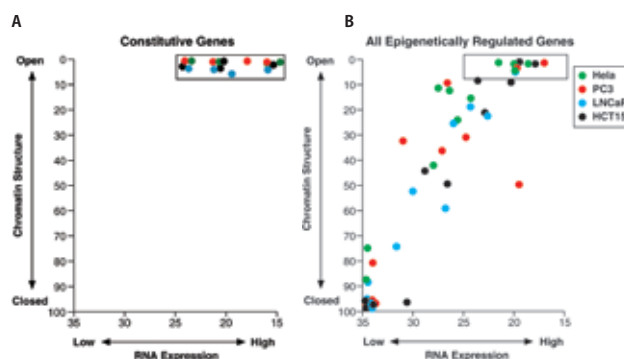

**EpiQ Chromatin Analysisキットから得られたクロマチン構造データと、様々な細胞株の複数遺伝子の遺伝子発現レベルの相関に関する分析結果例**  
A: 4つの構成的発現遺伝子 (GAPDH、ACTB、LNCaP、およびHCT15) の近傍プロモーター領域のクロマチン状態。

各遺伝子プロモーターは開いているクロマチン構造をとっていた。

B: 11のエピジェネティクス調節遺伝子プロモーター (ABCB1、CDH1、CDH13、DAPK1、DKK1、GSTP1、PTGS2、TP73、WT1、p14ARF、およびp16INK4A) を同じ4つの細胞株でクロマチン構造を評価した。

クロマチン状態は、遺伝子のパネルによって異なり、遺伝子発現レベルと強い相関を示した。

開口状態のプロモーター領域は中間から高いレベルの遺伝子発現 (右上の黒い囲み) を示したが、閉鎖状態のものは低発現量を示した。(左下)

## 適合機種

CFX96, CFX96 Touch, CFX384, CFX 384 Touch, CFX Connect, MiniOpticon, MyiQ2, iQ5, iCycler iQ, MyiQ, Opticon, Opticon2, Chromo4, Life Technologies(Applied Biosystems) StepOne, StepOne Plus, Roche LightCycler480, Agilent (Stratagene) Mxシリーズ, Eppendorf Mastercycler ep realplexシリーズ, QIAGEN (Corbett) Rotor-Gene Q, Takara Dice Real Time System

## Ordering Information

カタログ番号	品名	価格	キャンペーン価格
172-5400JA	EpiQ Chromatin Analysisキット (50反応)	¥170,000	¥102,000
172-5401JA	EpiQ Chromatin Analysisキット (100反応)	¥310,000	¥186,000

## 逆転写酵素

## iScript シリーズ 選択ガイド

製品名	iScript Advanced cDNA Synthesis Kit (p.19)	iScript RT Supermix for RT-qPCR (p.20)	iScript cDNA Synthesis Kit (p.20)	iScript Select cDNA Synthesis Kit (p.20)
Tube数	2 tube	1 tube	2 tube	3 tube
1反応当り RNA量	100fg~7.5 $\mu$ g	500fg~1 $\mu$ g	100fg~1 $\mu$ g	1pg~1 $\mu$ g
プライマー	Oligo dT, randomの プレミックス	Oligo dT, randomの プレミックス	Oligo dT, randomの プレミックス	Oligo dT/random/gene specificから選択
特長	高感度 & 大量RNAサンプルに対応	1-tube 反応で簡単調製	2-tube 反応で 簡単調製 & 高感度	プライマー選択




## 高感度かつ大量RNAも逆転写可能！

## iScript Advanced cDNA Synthesis Kit

30%  
OFF

少量（100fg）から、大量（7.5  $\mu$ g）のRNAサンプルを逆転写できます。

- ✓高感度：少量のRNA（100fg）からも高感度な検出が可能
- ✓大量RNAサンプルに対応：7.5  $\mu$ gと大量のRNA検出が可能のため、多数のターゲットRNAを一挙に検出可能、ハイスループットという利点を実現
- ✓短時間：高性能なiScriptと簡便なプロトコールが、従来の約半分の反応時間を実現

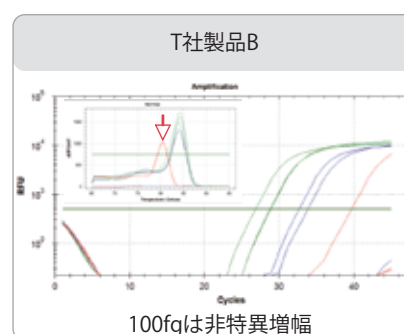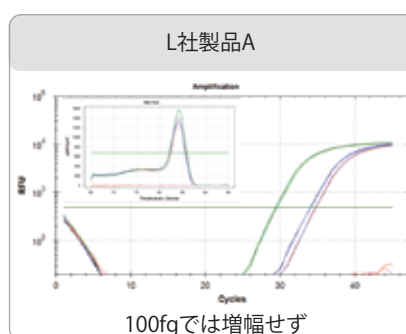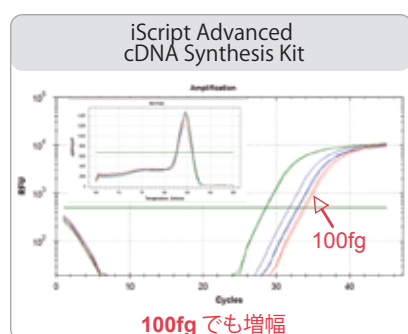

## 他社製品との低濃度域における比較

10pg ~ 100 fg のHuman Reference Total RNA に対してGAPDH 遺伝子の検出を行った。

増幅曲線：10pg, 1pg, 100fg

弊社CFX96 リアルタイムPCR 解析システムを使用。検出にはSsoAdvanced SYBR Green Supermix を用いた。

## Ordering Information

カタログ番号	品名	価格	キャンペーン価格
170-8842	iScript Advanced cDNA Synthesis Kit (20 $\mu$ l×50反応)	¥30,000	¥21,000
170-8843	iScript Advanced cDNA Synthesis Kit (20 $\mu$ l×250反応)	¥120,000	¥84,000

超簡単調製！短時間逆転写！

## iScript RT Supermix for RT-qPCR

30%  
OFF

従来のキットでは別々になっていた酵素とBufferを一本のチューブにまとめたことで、簡便なプロトコルを実現しました。

- ✓1 tube反応：酵素とBufferを1本のチューブにまとめ単純化された反応溶液キットは、簡便なプロトコルおよび調製ミス防止を実現
- ✓短時間：高性能なiScriptと簡便なプロトコルが、従来の約半分の反応時間を実現
- ✓高感度：少量のRNAからも高感度な検出が可能

## Ordering Information


カタログ番号	品名	価格	キャンペーン価格
170-8840	iScript RT Supermix for RT-qPCR (20 $\mu$ l $\times$ 25反応)	¥14,500	¥10,000
170-8841	iScript RT Supermix for RT-qPCR (20 $\mu$ l $\times$ 100反応)	¥45,000	¥31,500

簡単調製！短時間逆転写！

iScript cDNA Synthesis Kit/  
iScript Select cDNA Synthesis Kit20-30%  
OFF

最適化されたreaction mixとiScript reverse transcriptase（逆転写酵素）により、簡便・短時間なRT-PCRと高感度なリアルタイムPCRの両方を実現できるキットです。iScript cDNA Synthesis Kitはプライマーのプレミックス、iScript Select cDNA Synthesis Kitはプライマー選択型となっております。

- ✓簡便：単純化された反応溶液キットは、簡便なプロトコルおよび調製ミス防止を実現
- ✓短時間：高性能なiScriptと簡便なプロトコルが、従来の約半分の反応時間を実現
- ✓高感度：少量のRNAからも高感度な検出が可能

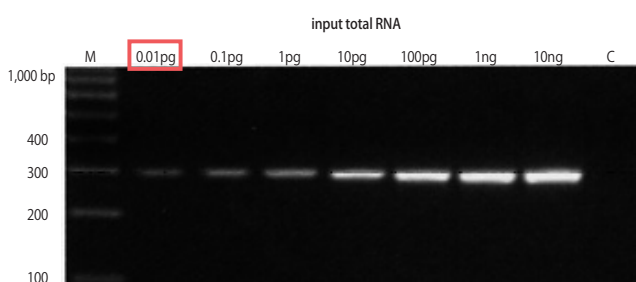


RT-PCRにおけるiScriptの感度の確認結果  
42°CにおいてcDNAを合成し、iTaq DNA ポリメラーゼによって $\beta$ -actin遺伝子を増幅した例。

Lane M：Ez Load™ 100bp molecular ruler

Lane C：ネガティブコントロール

0.01 pgにおいてもバンドを確認できる

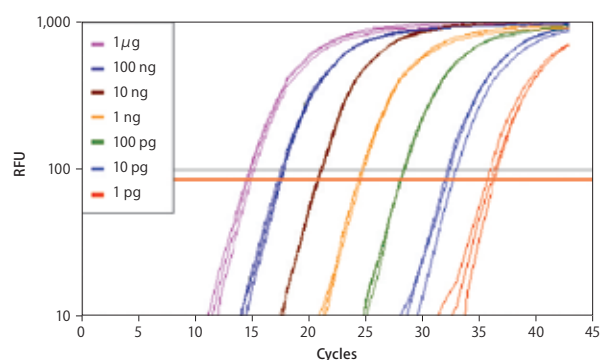

iScript cDNA Synthesis kitによる広いダイナミックレンジ

RNAの逆転写によって得られたcDNAをiQ SYBR Green Supermixで増幅した。R<sup>2</sup>=0.998、PCR効率=96.5%

## Ordering Information

カタログ番号	品名	価格	キャンペーン価格
<b>プライマープレミックスタイプ</b>			
170-8890	iScript cDNA Synthesis kit (20 $\mu$ l $\times$ 25反応分)	¥21,000	¥14,700
170-8891	iScript cDNA Synthesis kit (20 $\mu$ l $\times$ 100反応分)	¥65,000	¥45,500
170-8891B04	iScript cDNA Synthesis kit (20 $\mu$ l $\times$ 400反応分)	¥160,000	¥112,000
<b>プライマー選択タイプ</b>			
170-8896	iScript Select cDNA Synthesis kit (20 $\mu$ l $\times$ 25反応分)	¥23,000	¥18,400
170-8897	iScript Select cDNA Synthesis kit (20 $\mu$ l $\times$ 100反応分)	¥67,000	¥53,600


簡単に、短時間・正確・高感度な、RT-リアルタイムPCR!

# iScript One-Step RT-PCR Kit with SYBR Green/ iScript One-Step RT-PCR Kit for Probes

20%  
OFF


RT-リアルタイムPCR用に設計された、簡便・短時間・正確・高感度な試薬キットです。

- ✓簡便：1本のチューブ内でOne-Step RT-PCRが可能
- ✓短時間かつ正確：高性能なiScriptと独自の反応バッファが、短時間かつ正確なOneStep RT-PCRを実現
- ✓高感度：少量のRNAからも高感度な検出が可能

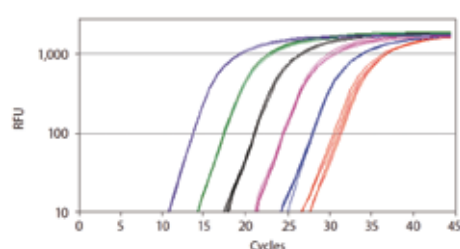

幅広い濃度域で優れた感度を示すiScript One-Step RT-PCR kit with SYBR Green

βアクチンプライマー、100ng~1pgのHeLa細胞Total RNAを用い、N=4でワンステップRT-PCR反応を実施した例。MyiQ™リアルタイムシステム使用。Efficiency=96%、R<sup>2</sup>=0.999

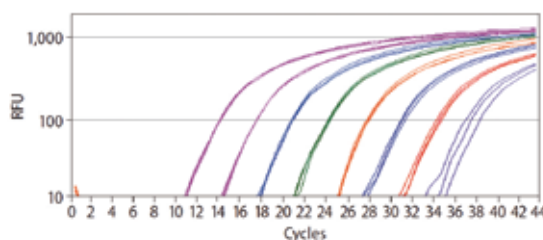

幅広い濃度域で優れた感度を示すiScript One-Step RT-PCR kit for Probes

Aurum™ Total RNA kitを用いてHeLa細胞から分離したRNA (1μg~100fg)を逆転写し、βアクチンプライマーとFAM標識プローブを用いて増幅を行った例。それぞれtriplicateで行い、iCycler iQ®システムでRT-PCRを実施した。Efficiency=97.2%、R<sup>2</sup>=1.000

## 適合機種

CFX96, CFX96 Touch, CFX384, CFX 384 Touch, CFX Connect, MiniOpticon, MyiQ2, iQ5, iCycler iQ, MyiQ, Opticon, Opticon2, Chromo4, Life Technologies(Applied Biosystems) StepOne, StepOne Plus, Roche LightCycler480, Eppendorf Mastercycler ep realplexシリーズ, QIAGEN (Corbett) Rotor-Gene Q, Takara Dice Real Time System

## Ordering Information

カタログ番号	品名	価格	キャンペーン価格
<b>インターカレーション色素検出</b>			
170-8892	iScript One-Step RT-PCR Kit with SYBR Green (50μl×50反応)	¥24,000	¥19,200
170-8892B04	iScript One-Step RT-PCR Kit with SYBR Green (50μl×200反応)	¥92,000	¥73,600
<b>プローブ検出</b>			
170-8894	iScript One-Step RT-PCR Kit for Probes (50μl×50反応)	¥24,000	¥19,200
170-8894B04	iScript One-Step RT-PCR Kit for Probes (50μl×200反応)	¥88,000	¥70,400

実績多数! いつものリアルタイムPCR試薬もご利用ください

# iQ SYBR Green Supermix/ iQ Supermix

20%  
OFF

- ✓インターカレーション色素検出にはiQ SYBR Green Supermix
- ✓プローブ検出にはiQ Supermix

## 適合機種

CFX96, CFX96 Touch, CFX384, CFX 384 Touch, CFX Connect, MiniOpticon, MyiQ2, iQ5, iCycler iQ, MyiQ, Opticon, Opticon2, Chromo4, Life Technologies(Applied Biosystems) StepOne, StepOne Plus, Roche LightCycler480, Eppendorf Mastercycler ep realplexシリーズ, QIAGEN (Corbett) Rotor-Gene Q, Takara Dice Real Time System

## Ordering Information

カタログ番号	品名	価格	キャンペーン価格
<b>インターカレーション色素検出</b>			
170-8880	iQ SYBR Green Supermix 2.5ml (50μl×100反応分)	¥32,000	¥25,600
170-8882	iQ SYBR Green Supermix 12.5ml (50μl×500反応分)	¥130,000	¥104,000
170-8882B02	iQ SYBR Green Supermix 25ml (50μl×1,000反応分)	¥240,000	¥192,000
170-8882B04	iQ SYBR Green Supermix 50ml (50μl×2,000反応分)	¥420,000	¥336,000
170-8885	iQ SYBR Green Supermix 50ml ボトル	¥390,000	¥312,000
<b>プローブ検出</b>			
170-8860	iQ Supermix 2.5ml (50μl×100反応分)	¥34,000	¥27,200
170-8860B05	iQ Supermix 12.5ml (50μl×500反応分)	¥145,000	¥116,000
170-8860B10	iQ Supermix 25ml (50μl×1,000反応分)	¥270,000	¥216,000

## PCR/リアルタイムPCR消耗品 (チューブ・プレート) 選択ガイド

カテゴリ				カタログ番号／製品名	
チューブ	0.5ml		TBI-05XX	0.5ml thin-wall シングルチューブ (p.24)	
	0.2ml	フラットキャップ	TFI-0201	0.2ml thin-wall チューブ (p.24)	
		ドームキャップ	TWI-0201		
ストリップチューブ	8 well	Low-Profile (少容量 PCR対応)	TLS-08XX	0.2ml Low 8連チューブ (p.24)	
		Full-Height	TBS-02XX	0.2ml thin-wall 8連チューブ (p.24)	
	12 well	Full-Height	TBS-12XX	0.2ml thin-wall 12連チューブ (p.24)	
プレート	48 well	Low-Profile (少容量 PCR対応)	スカート無 (切断可能)	MLL-48XX	Multiplate™ 48well PCRプレート (Low-Profile) (p.24)
	96 well	Low-Profile (少容量 PCR対応)	スカート付 (well間の温度均一性高い)	HSP-96XX	96 well Hard-Shell® マイクロプレート (p.23)
			スカート無 (切断可能)	MLL-96XX	Multiplate™ 96well PCR プレート (Low-Profile) (p.24)
		Full-Height	セミスカー্ট付 (多機種対応)	HSS-96XX	96well Hard-Shell® セミスカー্ট (p.23)
			スカート無 (切断可能)	MLP-96XX	Multiplate™ 96 well PCR プレート (Full-Height) (p.24)
	384 well	Full-Height	スカート付 (well間の温度均一性高い)	HSP-38XX	384well Hard-Shell® マイクロプレート (p.23)

## PCR/リアルタイムPCR消耗品 (キャップ・シール) 選択ガイド

カテゴリ	特長	製品名
リアルタイム PCRを行いたい	キャップ型 (Strip Tube用)	0.2ml Optical 8連フラットキャップ (p.23, 24)
	フィルム型 (96, 384well用)	Microseal® 'B' シーリングフィルム (p.23, 24)
PCRを行いたい	フィルム型 (96, 384well用)	Microseal® 'A' シーリングフィルム (p.24)
	キャップ型 (Strip Tube用)	0.2ml 8連ドームキャップ (p.24)



## 高品質PCR用スカート付マイクロプレート


## Hard-Shellプレート~HSP PCRに彩りを！ Colorful life !!

30%  
OFF

- より正確なPCR/リアルタイムPCRが可能：強固なスカートがプレートの変形及び外気の影響を防ぐことで、ウェル間の温度均一性が増すため、全てのウェルで均一なデータを取得することができます。
- 少容量/Fast PCRに最適：Low Profile（16.05mm）のため少容量やFast PCRでもばらつきの少ない増幅を実現します。
- 使いやすい形状・色：スカート付きなので、チューブスタンドやプレートホルダー無しで分注を行うことができます。また、プレートが色分けされているため、サンプルや実験者の識別を容易に行うことができます。
- 白色ウェルはリアルタイムPCRに最適：白色ウェルは透明ウェルよりも蛍光強度を強く検出でき、かつブロックにおける蛍光物質のコンタミの影響を受けないため、リアルタイムPCRにおいて高感度のデータを取得することができます。



Hard Shell スカートとデッキが熱による反りや縮みを防ぎます。

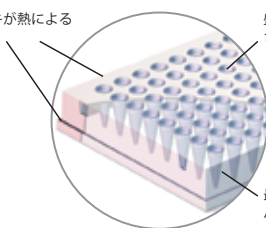

盛り上がったウェルの縁がシーリング効果を高めます。

最適な熱伝導とサンプルリカバリーを実現するThin-wallポリプロピレン製ウェル

Hard-Shellプレートのデザインは、堅く、温度安定ポリマーから形作られるスカートとデッキ部分と低DNA結合特性を持ったバージン・ポリプロピレンにより成型されたThin-wallウェル部から構成されます。Hard-Shellの2コンポーネントデザインは、ポリプロピレンのみを用いた一体形成のPCRプレートがPCR中またはヒートシーリングの高温にさらされるとき、起こるゆがみや縮みとブロックへのプレートの貼り付きの問題を防止します。

## Hard-Shellプレートセレクションガイド

## 96well Hard-Shellマイクロプレート

Shell Color		Clear well	White well
White	白色	HSP-9601	HSP-9655
Red	赤色	HSP-9611	
Yellow	黄色	HSP-9621	
Blue	青色	HSP-9631	HSP-9635
Green	緑色	HSP-9641	HSP-9645
Black	黒色	HSP-9661	HSP-9665

## 適合PCR装置

1000シリーズ、DNA Engineシリーズ（PTC200他）

## 適合リアルタイムPCR装置

CFXシリーズ、Chromo4、Opticon

## Ordering Information~Clear well

カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格
<b>96well Hard-Shellプレート/Clear well (Low Profile)</b>			
HSP-9601	Clear well/White shell (50枚)	¥39,000	¥27,300
HSP-9611	Clear well/Red shell (50枚)	¥39,000	¥27,300
HSP-9621	Clear well/Yellow shell (50枚)	¥39,000	¥27,300
HSP-9631	Clear well/Blue shell (50枚)	¥39,000	¥27,300
HSP-9641	Clear well/Green shell (50枚)	¥39,000	¥27,300
HSP-9661	Clear well/Black shell (50枚)	¥39,000	¥27,300
<b>384well Hard-Shellプレート/clear well (Low Profile)</b>			
HSP-3801	Clear well/Clear shell (50枚)	¥46,000	¥32,200
HSP-3841	Clear well/Green shell (50枚)	¥44,000	¥30,800
<b>プレート用キャップ</b>			
TCS-0803	0.2ml Optical 8連フラットキャップ/ナチュラル(120個)	¥8,000	¥5,600
TCS-0803B05	0.2ml Optical 8連フラットキャップ/ナチュラル(120個×5セット)	¥32,000	¥22,400

## Ordering Information~White well


カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格
<b>96well Hard-Shellプレート/White well (Low Profile)~リアルタイムPCRに最適</b>			
HSP-9635	White well/Blue shell (50枚)	¥39,000	¥27,300
HSP-9645	White well/Green shell (50枚)	¥39,000	¥27,300
HSP-9655	White well/White shell (50枚)	¥39,000	¥27,300
HSP-9665	White well/Black shell (50枚)	¥39,000	¥27,300
<b>384well Hard-Shellプレート/White well (Low Profile)~リアルタイムPCRに最適</b>			
HSP-3805	White well/Clear shell (50枚)	¥49,000	¥34,300
HSP-3865	White well/Black shell (50枚)	¥44,000	¥30,800
<b>プレート用シール</b>			
MSB-1001	Microseal 'B'シーリングフィルム(100枚)	¥31,000	¥21,700
MSB-1001B05	Microseal 'B'シーリングフィルム(500枚)	¥124,000	¥86,800

## 高品質PCR用セミスカーコート付マイクロプレート

## Hard-Shellセミスカーコート~HSS

30%  
OFF

- 適合機種種の広さ：標準高(20.75mm)wellは、一般的なサーマルサイクラー・リアルタイムPCR装置・DNAシーケンサーに適合します
- より正確なPCR/リアルタイムPCRが可能  
強固なスカートがプレートの変形および外気の影響を防ぐことで、well間の温度均一性が増すため、プレートの隅々まで均一なデータを取得することができます。

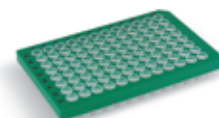

## 適合PCR装置

C1000, C1000 Touch, S1000, DNA Engine Tetrad, DNA Engine Dyad, Dyad disciple, PTC-200, T100, iCycler  
Life Technologies(Applied Biosystems) 2720, 9700, Veriti, Eppendorf Mastercycler series

## 適合リアルタイムPCR機種

MiQ2, iQ5, iCyclerIQ, MyiQ, Life Technologies(Applied Biosystems) 7300, 7500, 7900HT, Agilent (Stratagene) Mxシリーズ, Eppendorf Mastercycler ep realplex

## Ordering Information

カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格
<b>96well Hard-Shellセミスカーコート</b>			
HSS-9601	Clear shell/Clear well (25枚)	¥17,000	¥11,900
HSS-9641	Green shell/Clear well (25枚)	¥17,000	¥11,900
HSS-9641B04	Green shell/Clear well (100枚)	¥60,000	¥42,000

増幅のムラを最小に！

## Low Profile PCRチューブ&amp;プレート

30%  
OFF

☑ 蒸発によるPCR溶液の濃度変化が少ないため、データがばらつきにくい

PCR溶液は、加熱中にチューブ内の空間へ蒸発し、濃度変化等が生じます。Low Profileチューブ・プレートは液面上部の空間が少ないため、蒸発によるPCR溶液の濃度変化が少なくなります。よってLow Profileは、特に濃度変化によるデータのばらつきが出やすい、少容量のリアルタイムPCRにおける使用が効果的です。

## 適合PCR装置

C1000, C1000 Touch, S1000, DNA Engine Tetrad, DNA Engine Dyad, Dyad disciple, PTC-200, MJ Mini, Life Technologies(Applied Biosystems) 9800 fast, Veriti fast 100, Eppendorf Mastercycler series

## 適合リアルタイムPCR装置

CFX96, CFX96 Touch, CFX Connect, MiniOpticon, Opticon, Opticon2, Chromo4, Eppendorf Mastercycler ep realplex

## Ordering Information

カタログ番号	品名	価格	キャンペーン価格
<b>Low-Profile 0.2ml ストリップチューブ</b>			
TLS-0801	0.2ml Low 8連チューブ/ナチュラル (120個)	¥16,000	¥11,200
TLS-0851	0.2ml Low 8連チューブ/ホワイト (120個)	¥18,000	¥12,600
TLS-0851B05	0.2ml Low 8連チューブ/ホワイト (120個×5)	¥72,000	¥50,400
<b>Low-Profile PCRプレート</b>			
MLL-9601	Multiplate 96well PCRプレート (Low-Profile)/ナチュラル (25枚)	¥21,000	¥14,700
MLL-9601B05	Multiplate 96well PCRプレート (Low-Profile)/ナチュラル (25枚×5)	¥87,000	¥60,900
MLL-9651	Multiplate 96well PCRプレート (Low-Profile)/ホワイト (25枚)	¥21,000	¥14,700
MLL-9651B05	Multiplate 96well PCRプレート (Low-Profile)/ホワイト (25枚×5)	¥87,000	¥60,900
MLL-4801	Multiplate 48well PCRプレート (Low-Profile)/ナチュラル (50枚)	¥32,000	¥22,400
MLL-4851	Multiplate 48well PCRプレート (Low-Profile)/ホワイト (50枚)	¥32,000	¥22,400

## 標準高PCRチューブ&amp;プレート

30%  
OFF

一般的なPCR用消耗品です。

## 適合PCR機種(0.5mlチューブを除く)

C1000, C1000 Touch, S1000, T100, DNA Engine Tetrad, DNA Engine Dyad, Dyad disciple, PTC-200, iCycler, MJ Mini, Life Technologies(Applied Biosystems) 2720, 9700, Veriti, Eppendorf Mastercycler series

## 適合リアルタイムPCR機種 (0.5mlチューブを除く)

MyiQ2, iQ5, iCycleriQ, MyiQ, Chromo4, Life Technologies(Applied Biosystems) 7300, 7500, 7900HT, Agilent (Stratagene) Mxシリーズ, Eppendorf Mastercycler ep realplex

## Ordering Information

カタログ番号	品名	価格	キャンペーン価格
<b>標準高0.2ml PCRストリップチューブ</b>			
TBS-0201	0.2ml thin-wall 8連チューブ/ナチュラル (125個)	¥12,000	¥8,400
TBS-0201B05	0.2ml thin-wall 8連チューブ/ナチュラル (125×5個)	¥48,000	¥33,600
TBS-1201	0.2ml thin-wall 12連チューブ/ナチュラル (100個)	¥17,000	¥11,900
<b>標準高0.2ml/0.5ml PCRシングルチューブ キャップ付き</b>			
TFI-0201	0.2ml thin-wall チューブ/ナチュラルフラットキャップ付 (1000個)	¥9,000	¥6,300
TWI-0201	0.2ml thin-wall チューブ/ナチュラルドームキャップ付 (1000個)	¥9,000	¥6,300
TWI-0201B05	0.2ml thin-wall チューブ/ナチュラルドームキャップ付 (5000個)	¥36,000	¥25,200
TBI-0501	0.5ml thin-wall シングルチューブ/ナチュラルキャップ付 (1000個)	¥8,000	¥5,600
<b>標準高PCRプレート</b>			
MPL-9601	Multiplate 96well PCRプレート/ナチュラル (25枚)	¥19,000	¥13,300
MPL-9601B05	Multiplate 96well PCRプレート/ナチュラル (125枚)	¥76,000	¥53,200

## PCR/リアルタイムPCR用キャップ&amp;フィルム

30%  
OFF

## Ordering Information

カタログ番号	品名	価格	キャンペーン価格
<b>リアルタイムPCR用キャップ</b>			
TCS-0803	0.2ml Optical 8連フラットキャップ/ナチュラル (120個)	¥8,000	¥5,600
TCS-0803B05	0.2ml Optical 8連フラットキャップ/ナチュラル (120個×5セット)	¥32,000	¥22,400
<b>リアルタイムPCR用フィルム</b>			
MSB-1001	Microseal 'B'シーリングフィルム (100枚)	¥31,000	¥21,700
MSB-1001B05	Microseal 'B'シーリングフィルム (500枚)	¥124,000	¥86,800
<b>PCR用キャップ</b>			
TCS-0801	0.2ml 8連ドームキャップ/ナチュラル (130個)	¥7,000	¥4,900
TCS-0801B05	0.2ml 8連ドームキャップ/ナチュラル (130個×5セット)	¥28,000	¥19,600
TCS-1201	0.2ml 12連ドームキャップ/ナチュラル (200個)	¥15,000	¥10,500
<b>PCR用フィルム</b>			
MSA-5001	Microseal 'A'シーリングフィルム (50枚)	¥21,000	¥14,700

## 低圧クロマトグラフィーのベーシックシステム

## BioLogic LP システム

## BioLogic LP システム

ペリスタルティックポンプ、グラジエントミキサー、サンプルインジェクションバルブ、検出器（UVおよびコンダクティビティ）、コントローラー、カラムラックを一体化し、1台で低圧クロマトグラフィーによる実験を完全にサポート\*します。

\*最大送液圧力は 30psi (0.2MPa) です。この圧力以下で使用できる樹脂・カラムをご使用ください。

## BioLogic LP 2110 &amp; SV3システム

ウィンドウ分取やピーク分取が可能なシステムです。

## 構成

- BioLogic LPシステムとモデル2110フラクションコレクター、SV3ディパーターバルブ

## BioLogic LP 2110 &amp; SV3 &amp; SWシステム

ウィンドウ分取やピーク分取が可能で、パソコンへのデータ記録用Dataviewソフトウェアが付属するシステムです。

## 構成

- BioLogic LPシステムとモデル2110フラクションコレクター、SV3ディパーターバルブ、DataView ソフトウェア

## BioLogic LP システム

1. コントローラー
2. ペリスタルティックポンプ
3. グラジエントミキサー
4. UVモニター
5. コンダクティビティモニター
6. カラムラック
7. SV3ディパーターバルブ (オプション)
8. モデル2110フラクションコレクター



(図中にSV3ディパーターバルブは掲載されていません。SV-5バルブ、エコノカラムは付属していません)

20% OFF

## Ordering Information

カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格
731-8302JA	BioLogic LP 2110 & SV3システム	¥1,370,000	¥1,096,000
731-8336JA	BioLogic LP 2110 & SV3 & SWシステム	¥1,670,000	¥1,336,000

## エコノグラジエントポンプ

## EGPコンボ エコノグラジエントポンプ

グラジエントコントローラー内蔵ペリスタルティックポンプ。ペリスタルティックポンプにグラジエント機能（コントローラー、グラジエントミキサー）がついた、低圧クロマトグラフィー用装置です。

これ一台で、イオン交換やアフィニティー、疎水、ハイドロキシアパタイト、ゲル濾過などさまざまなクロマトグラフィー手法に対応できます\*。

\*最大送液圧力は 30psi (0.2MPa) です。この圧力以下で使用できる樹脂・カラムをご使用ください。


## 構成

- EGPコンボエコノグラジエントポンプ  
EGP本体、EGPラック、インジェクションバルブ、グラジエントミキサー、チューブ/フィッティングキット
- EGPコンボ Fracシステム  
EGPコンボエコノグラジエントポンプ、モデル2110フラクションコレクター、SV3ディパーターバルブ、接続ケーブル

## エコノグラジエントポンプ

1. EGP本体
2. グラジエントミキサー
3. MV-6インジェクションバルブ
4. フローアダプター付エコノカラム
5. スプリッターバルブ
6. SV-3バルブ

EGPコンボエコノグラジエントポンプシステムには、1, 2, 3およびEGPラックが含まれます。その他はオプション品です。

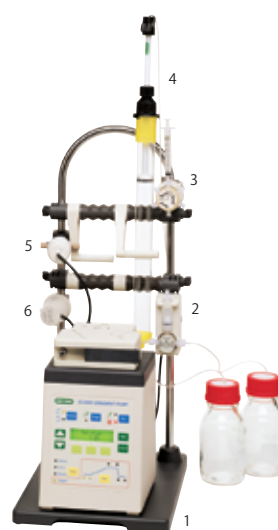

20% OFF

## Ordering Information

カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格
731-9034JP	EGPコンボエコノグラジエントポンプ	¥680,000	¥544,000
731-9034JPF	EGPコンボ Fracシステム	¥780,000	¥624,000


アフィニティークロマトグラフィー用装置の新定番

## Profiniaシステム

アフィニティークロマトグラフィーに加え脱塩・バッファー交換まで全自動で行うProfiniaシステムです。

- ✓ サンプルをセットするだけで、アフィニティークロマトグラフィーと脱塩・バッファー交換を全自動で実行  
(例: Hisタグタンパク質精製+イミダゾール除去、GSTタグタンパク質精製+グルタチオン除去、抗体ProteinA精製+中性pHバッファーへの置換など)
- ✓ タッチスクリーンによる簡単操作
- ✓ カラムの自動洗浄・保存液置換可能

Profiniaソフトウェアはオンライン/オフラインのどちらでも使用でき、UVや電気伝導度、フラクションなどを色分けして表示できます。また、回収量や濃度、Run詳細データ表示、チャートオーバーレイも行えます。

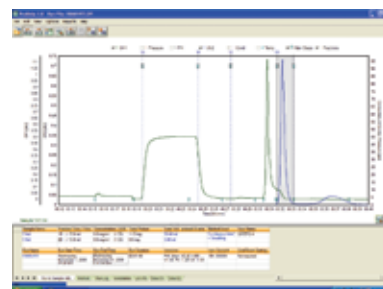25%  
OFF

## Ordering Information

カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格
620-1016JA	Profiniaシステム ソフトウェア付	¥2,500,000	¥1,875,000

## NGCクロマトグラフィーシステム発売記念キャンペーン

限定20台

期間: 2013年3月25日 ~

## 次世代クロマトグラフィーシステム

## NGCクロマトグラフィーシステム

バイオ・ラッドではあらゆるお客様の精製ニーズに応じたシステムを設計できる中高压クロマトグラフィー、NGCクロマトグラフィーシステムを発売しました。

発売を記念して、限定20台をお得な価格でご提供いたします。

※本キャンペーンは合計20台に達し次第、終了いたします。

タッチパネルを採用し、新しいソフトウェアは誰でも簡単にメソッド作成、データ解析が可能です。

豊富なモジュールを目的の用途に合わせてお選びいただけます。

- ・ソフトウェアの操作が簡単
- ・フロント配管で操作しやすい
- ・モジュールのPlug-'n'-Play方式で機能追加が楽

※写真はNGC Questシステムに各種モジュール等を追加しています。



## Ordering Information

カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格
738-0001J1	<b>NGC Quest 10 クロマトグラフィーシステム</b> 構成内容: NGC Questシステム本体、ソフトウェア、ノートPC、BioFracフラクションコレクター、付属品 (チューピング、フィッティング、カラムクランプ2個、カラムホルダー2個、チューブホルダー5個)	¥5,200,000	¥4,200,000
738-0001CAM	<b>NGC Quest 10 クロマトグラフィーシステム + カラムバルブ + サンプルポンプ + 拡張ベイ</b> 構成内容: NGC Questシステム本体、ソフトウェア、ノートPC、BioFracフラクションコレクター、付属品 (チューピング、フィッティング、カラムクランプ2個、カラムホルダー2個、チューブホルダー5個)、NGCサンプルポンプ、NGCカラムスイッチングバルブ、NGC拡張ベイ Tier 3	¥6,780,000	¥5,550,000

## 組換えタグタンパク質アフィニティー精製

20%  
OFF

## Ni-IMAC Profinity Hisタグタンパク質の精製

IMAC Profinity担体は、Hisタグ付きタンパク質精製のアフィニティークロマトグラフィー担体です。


UNOsphere™ビーズをベースに、二価/三価金属イオンに対するキレートリガンドとしてイミノ二酢酸 (IDA) が結合しています。

IMAC Profinity担体は非変性または変性条件下で使用でき、クロマトグラフィー機器、自然落下カラム、スピンカラムを使用した精製に適しています。担体はあらかじめNi<sup>2+</sup>をチャージした状態で、スラリーまたはプレパックカラム (カートリッジ) の形状で利用できます。

## GST Profinity

GST Profinityは、GSTタグ付きタンパク質精製のアフィニティークロマトグラフィー担体です。

- ✓多孔性ビーズ (UNOsphere) でリガンド密度・量を最適化
- ✓高い結合量を維持したまま精製度を向上
- ✓流速を上げても結合量を維持
- ✓大きなタンパク質の精製にも優れます (例: 250kDa)

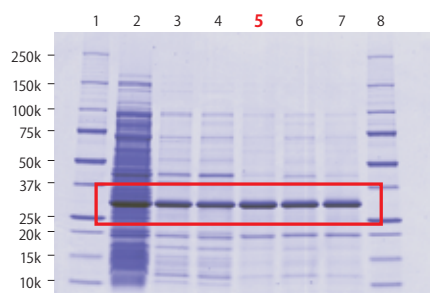

- 1,8: スタンダード  
2: 大腸菌抽出液  
3: Niアガロース (A社)  
4: アガロース+Ni (A社)  
5: Ni-IMAC Profinity  
6: Niアガロース (B社)  
7: Coアガロース (C社)

異なるIMAC担体による純度比較

## Ordering Information

カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格
732-4612	Bio-Scale Mini Ni-IMAC Profinityカートリッジ 5ml、1本	¥15,000	¥12,000
732-4622	Bio-Scale Mini GST Profinityカートリッジ 5ml、1本	¥30,000	¥24,000
620-0241	Native IMAC精製キット 1ml 構成内容: IMAC精製/バッファーキット、(lysis/バッファー、洗浄/バッファー、溶出/バッファー) IMACカートリッジ (2×1ml)	¥48,000	¥38,400
620-0243	GST精製キット 1ml 構成内容: GST精製/バッファーキット、(lysis/バッファー、洗浄/バッファー、溶出/バッファー) GSTカートリッジ (2×1ml)	¥58,000	¥46,400




アフィニティータグをベースにした新しいタンパク質精製システム

# Profinity eXact Fusion-Tag System


25-50%  
OFF

Profinity eXact™ Fusion-Tag Systemはアフィニティータグをベースにしたタンパク質精製システムです。このシステムを使えば、大腸菌で発現させたタグ融合タンパク質をOne-Stepで、ネイティブN-末端アミノ酸の状態 (Tag-free) のタンパク質を1回のクロマト操作で高純度に精製します。

- ✓ タグ由来のアミノ酸が残らない  
完全タグフリータンパク質精製システム
- ✓ On-Column切断でタグの切断と分離が  
ワンステップで実現
- ✓ タグ除去用のプロテアーゼが不要
- ✓ Profiniaシステムなどで精製の自動化が可能

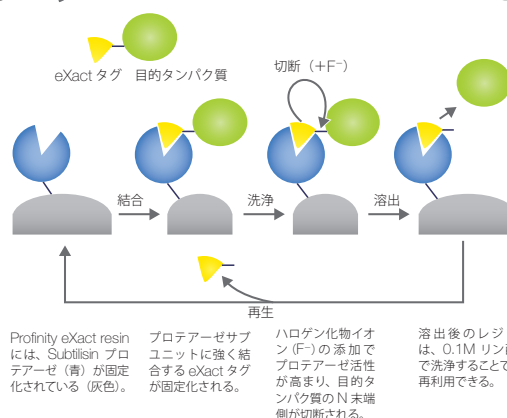

eXactタグを使ったタンパク質の精製ステップ  
レジンに結合したタグ付きタンパク質がフッ素イオン (F<sup>-</sup>) の添加でタグフリータンパク質として精製される。

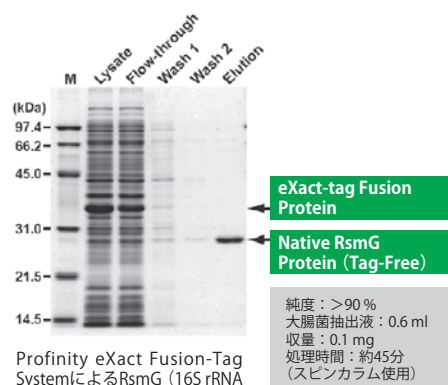

Profinity eXact Fusion-Tag SystemによるRsmG (16S rRNAメチル化酵素) の発現とタグフリー精製 (独) 食品総合研究所岡本先生よりご提供

## Ordering Information

カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格
<b>ベクター (25%Off)</b>			
156-3002	Profinity eXact pPAL Supercoiled Expression Vector (10 µg)	¥32,000	¥24,000
<b>ビーズ・カラム (40%Off)</b>			
156-3005	Profinity eXact Purification Resin 10ml	¥90,000	¥54,000
156-3007	Profinity eXact ミニスピカラム (0.1ml) 10本	¥36,000	¥21,600
732-4646	Bio-Scale Mini Profinity eXact カートリッジ 2×1ml	¥42,000	¥25,200
732-4647	Bio-Scale Mini Profinity eXact カートリッジ 4×1ml	¥75,000	¥45,000
732-4648	Bio-Scale Mini Profinity eXact カートリッジ 1×5ml	¥70,000	¥42,000
<b>スターターキット (30%Off)</b>			
156-3006	Profinity eXact Mini Spin Purification Starter Kit 構成内容: eXact ミニスピカラム10本、回収チューブ、コントロールタンパク質、バクテリア溶解液、結合・洗浄バッファー、溶出バッファー	¥95,000	¥66,500
<b>抗体 (50%Off)</b>			
156-3004	Profinity eXact Antibody Reagent (100 µl, 1mg/ml)	¥18,000	¥9,000

参考文献

Huang et al., One-step purification of a functional, constitutively activated form of visual arrestin. Protein Expression and Purification 82(1), 55-60, 2012 (PMID: 22133714)

## Bio-Scale CHTカラム

ハイドロキシアパタイト (CHT) は、リン酸カルシウム的一种で、疎水相互作用とイオン交換作用を組み合わせたユニークな特性により、他のクロマトグラフィーで分離できないタンパク質類を分離することができる可能性があります。これまで多くの文献で使用され、また工業スケールでの利用もされています。

Bio-Scale CHT- I カラムには粒径10 µmのCHTセラミックハイドロキシアパタイトType I がパックされており、タンパク質結合容量が大きく、酸性~塩基性タンパクの分離に最適です。


Bio-Scale Mini CHT Type I カラムは、粒径40 µmのCHTセラミックハイドロキシアパタイトType I が、ポリプロピレン製カートリッジに充填されており、低压での条件検討などに最適です。

## Ordering Information

カタログ番号	品名	容量	本数	通常価格	キャンペーン価格
751-0021	Bio-Scale CHT2-Iカラム	2ml	1	¥110,000	¥82,500
751-0023	Bio-Scale CHT5-Iカラム	5ml	1	¥160,000	¥120,000
751-0025	Bio-Scale CHT10-Iカラム	10ml	1	¥210,000	¥157,500
751-0027	Bio-Scale CHT20-Iカラム	20ml	1	¥300,000	¥225,000
732-4322	Bio-Scale Mini CHT Type I	5ml	1	¥15,000	¥11,250
732-4324	Bio-Scale Mini CHT Type I	5ml	5	¥60,000	¥45,000



## 標準タンパク質の精製例

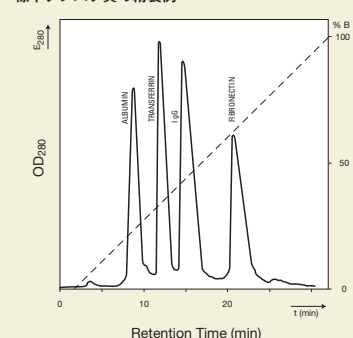

カラムサイズ: 7.5 x 100mm  
緩衝液: A: 1 mM リン酸ナトリウム緩衝液 pH 6.8  
B: 400 mM リン酸ナトリウム緩衝液 pH 6.8  
溶出方法: 0-100% B, 30 min グラジエント  
流速: 1 ml/min

タンパク質の溶出順  
(比較的、次のような順で溶出される)  
酸性タンパク→中性タンパク→塩基性タンパク  
※等電点が近いものは分子量小→中→大の順に溶出

簡単・便利な新しいBradford法

## Quick Startプロテインアッセイ

20%  
OFF

- ✓ 1種類の試薬（染色液）を加えるだけの簡単操作
- ✓ 塩や還元剤に強いタンパク質定量試薬  
(~2.5M NaCl, ~10mM DTT, ~1M 2ME, PBSなど)
- ✓ 希釈済みスタンダードでスタンダード調製の手間いらず
- ✓ スタンダードアッセイ法 (0.125mg/ml~1.5mg/ml) とマイクロアッセイ法 (1.25ug/ml~20ug/ml) の2つのプロトコル

## 操作方法

## Quick Startプロテインアッセイ染色液

混和

5分放置後、1時間以内に測定  $\lambda = 595\text{nm}$ 

スタンダードおよびサンプル



## Quick Startプロテインアッセイフォーマット

		試験管	マイクロプレート
スタンダードアッセイ法	測定範囲	0.125~1.5mg/ml	0.125~1.5mg/ml
	サンプル量	100 $\mu\text{l}$	5 $\mu\text{l}$
	染色液量	5ml	250 $\mu\text{l}$
	測定回数	200回/キット	4,000well/キット
マイクロアッセイ法	測定範囲	1.25~20 $\mu\text{g/ml}$	1.25~20 $\mu\text{g/ml}$
	サンプル量	1ml	150 $\mu\text{l}$
	染色液量	1ml	150 $\mu\text{l}$
	測定回数	1,000回/キット	6,666well/キット

## Ordering Information

カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格
500-0205JA	Quick Startプロテインアッセイ染色液 1L	¥15,500	¥12,400
500-0202JA	Quick Startプロテインアッセイキット2 構成内容: 1×染色液1L 1本、スタンダード (ウシ血清アルブミン) 2ml (0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2mg/ml) 各2本	¥28,500	¥22,800
500-0204JA	Quick Startプロテインアッセイキット4 構成内容: 1×染色液1L 1本、スタンダード (ウシ $\gamma$ グロブリン) 2ml (0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2mg/ml) 各2本	¥28,500	¥22,800

## プロテインアッセイ

### Bradford法タンパク質定量試薬

## Ordering Information

カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格
500-0001JA	プロテインアッセイキットI 構成内容: プロテインアッセイ染色液450ml (1)、スタンダードI (ウシ $\gamma$ グロブリン) (1)	¥28,500	¥22,800
500-0002JA	プロテインアッセイキットII 構成内容: プロテインアッセイ染色液450ml (1)、スタンダードII (ウシ血清アルブミン) (1)	¥28,500	¥22,800
500-0006JA	プロテインアッセイ染色液 450ml	¥24,500	¥19,600

## SmartSpec Plusスペクトロフォトメーター

20%  
OFF

## SmartSpec Plusスペクトロフォトメーター

- ☑ 波長領域は200-800nmで1nm刻みで波長選択可能
- ☑ 光源には大光量・長寿命キセノンフラッシュランプ採用
- ☑ 核酸濃度、タンパク質濃度計算がプレセット
- ☑ UV波長域の測定には50  $\mu$ lで測定可能なtrUViewキュベットが最適



## Ordering Information

カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格	割引率
170-2525	SmartSpec Plusスペクトロフォトメーター	¥680,000	¥544,000	20%

trUViewキュベット／  
スタンダード・セミマイクロキュベット25-42%  
OFF

## trUViewキュベット

- ☑ ディスポーサブルのUV透過キュベット
- ☑ 220~1100nmの範囲で使用可能
- ☑ 50  $\mu$ lで測定可能
- ☑ DNase/Rnaseフリー
- ☑ 使いやすい個別包装

ディスポーサブルスタンダード・  
セミマイクロキュベット

- ☑ タンパク質アッセイ、バイオ・ラッドのプロテインアッセイ、DCプロテインアッセイ、DCRCプロテインアッセイキットに最適
- ☑ スタンダードキュベットは3.5mlまで、セミマイクロキュベットは1.5mlまでの容量



trUViewキュベット

ディスポーサブルスタンダード・  
セミマイクロキュベット

## Ordering Information

カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格	割引率
<b>trUViewキュベット</b>				
170-2510	trUViewキュベット (50個)	¥12,000	¥7,000	42%
170-2510B02	trUViewキュベット (50個×2)	¥18,000	¥12,600	30%
<b>ディスポーサブルスタンダード・セミマイクロキュベット</b>				
223-9950B05	ディスポーザブルキュベットスタンダード 1-3.5ml (100個×5)	¥14,000	¥10,500	25%
223-9950B10	ディスポーザブルキュベットスタンダード 1-3.5ml (100個×10)	¥19,800	¥13,800	30%
223-9955B05	ディスポーザブルキュベットセミマイクロ 500-1,500 $\mu$ l (100個×5)	¥14,000	¥10,500	25%
223-9955B10	ディスポーザブルキュベットセミマイクロ 500-1,500 $\mu$ l (100個×10)	¥19,800	¥13,800	30%

# iMarkマイクロプレートリーダー

**20-47%  
OFF**

- ✓標準・オプションフィルター4枚付属
- ✓400～750nmの範囲で5nm刻みに設定された71種類の標準・オプションフィルターの中から4枚自由に選択可能
- ✓プリンター内蔵、高速検出
- ✓ソフトウェアとのセットで多彩なデータ解析
- ✓測定結果をCSVで保存できる

iMark Data Selectorソフトウェア付属 (Win用)



## 400～750nmの範囲で5nm刻みに設定された71種類のフィルター

ベストセラー機のiMarkだからこそ実現できた、400～750nmで5nm刻みに設定された71種類の標準・オプションフィルターから4枚のフィルターが選択可能です。

標準・オプションフィルター4枚までの価格は本体に含まれているため、フィルターを無駄にすることがありません。

**選択オプション：特注フィルター（400～750nm）は1枚で標準・オプションフィルター2枚扱いです。**


 標準・オプション  
フィルター4枚付属

or


 標準・オプション  
フィルター2枚  
+特注フィルター1枚

or



特注フィルター2枚

- 標準・オプションフィルター4枚を選択
- 標準・オプションフィルター2枚と特注フィルター1枚を選択
- 特注フィルター2枚を選択

注意) iMark本体で注文時に必ずフィルターをご指定ください。後日のご指定はご遠慮ください。  
オプションフィルターは2～3週間程度、特注フィルター（400～750nm）は2ヶ月程度納期がかかります。予めご了承ください。

## フィルター選択ガイド

波長	アッセイ	検出システム	発色	停止試薬
405nm	ELISA	AP/pNPP	Yellow	0.4N NaOH
415nm	ELISA	HRP/ABTS	Blue-Green	2% Oxalic Acid
450nm	ELISA	HRP/TMB	Yellow	1N H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>
490nm	ELISA	HRP/OPD	Yellow/Orange	5N H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>
540nm	Protein Determination Assay Chromogenic Substrate Assay			
550nm	O <sub>2</sub> Assay	Cytochrome C	Red	N/A
570nm	Cell Viability	MTT Dye	Purple	N/A
	DNA Quant	Diphenylamine	Purple	N/A
595nm	Protein Assay (Bradford)	CBB	Blue	
	Quick Start Protein Assay (Bradford)			
620nm	ELISA Reference Detection		Blue	
630nm	Cell Growth Kinetic/Reference		N/A	N/A
655nm	Kinetic ELISA	HRP/TMB	Brilliant Blue	N/A
750nm	DC Protein Assay (Lowry)	Cu/Folin	Brilliant Blue	N/A
	RC DC Protein Assay (Lowry)			




iMarkではご購入時に標準・オプションフィルターで4枚まで選択することができます。  
iMark本体には最大8フィルターを内蔵することができます。

## iMark Data Selector

iMark Data SelectorはコンピュータとUSBケーブルで接続されたiMark本体に保存されたデータをPC上でCSVで保存するWindows PC用プログラムです。専用のソフトウェアを用いない手軽なデータ解析に最適です。

iMark Data SelectorではiMarkと接続すると右図のようにiMarkに保存されたデータリストが表示されます。

ご希望のデータをクリックでCSVに保存することが可能です。またクリックだけでデータをMasterPlex ReaderFitへ移行することもできます。

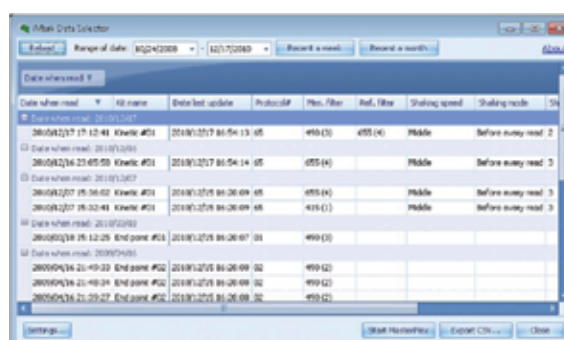

## Microplate Manager® 6

Microplate Manager 6はiMark/xMark用に開発された制御・解析用ソフトウェアです。WindowsおよびMac OS Xにて動作します。コンピュータと機器はUSBケーブル1本で簡単に接続可能です。専用ソフトウェアの利点である機器制御による測定から検量線作成、濃度算出までの解析を1つのソフトウェアで行うことができます。


### iMarkソフトウェアの比較

	iMark Data Selector	Microplate Manager 6	MasterPlex ReaderFit
サポートOS	Windows XP/7	Windows XP/7 Mac OS X	Windows XP/7
iMarkとの互換性	○ データ吸い出しのみ	◎ フルコントロール	○ 解析のみ (データ移行にはiMark Data Selectorを使用)
Endpoint解析	× 生データをCSV保存	○ 解析可能	○ 解析可能
検量線の自動選択	× なし	× なし(手動選択)	◎ 有り(自動選択)
Kinetics解析	× 生データをCSV保存	◎ 解析可能	× 未対応
3Dグラフ	×	×	○

## MasterPlex ReaderFit

ELISAのようなEndpoint測定において、より充実した解析機能をご提供するWindows用ソフトウェアです。

iMarkで測定したデータは「iMark Data Selector」を介してMasterPlex ReaderFitソフトウェア上に移行し、解析を行うことが可能です。

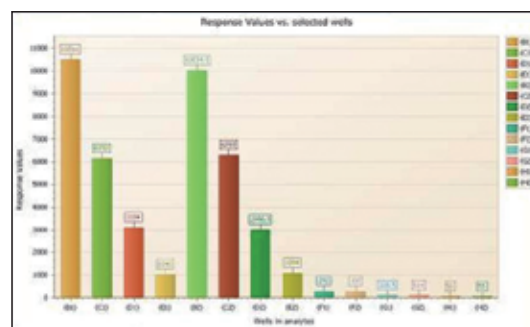


MasterPlex ReaderFitのグラフ機能

### Ordering Information


カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格	割引率
168-1130JA	<b>iMark マイクロプレートリーダー</b> 構成内容：iMark本体、iMark Data Selectorソフトウェア、USBケーブル、電源コード、取扱説明書	¥750,000	<b>¥600,000</b>	20%
168-1130J5	<b>iMark マイクロプレートリーダー + MasterPlex ReaderFit システム</b> 構成内容：iMark本体、iMark Data Selectorソフトウェア、MasterPlex ReaderFitソフトウェア、USBケーブル、電源コード、取扱説明書	¥780,000	<b>¥624,000</b>	20%
168-1135JA	<b>iMark マイクロプレートリーダー 解析ソフトシステム</b> 構成内容：iMark本体、iMark Data Selectorソフトウェア、Microplate Manager 6ソフトウェア、USBケーブル、電源コード、取扱説明書	¥850,000	<b>¥680,000</b>	20%
168-1130J1	<b>iMark マイクロプレートリーダー PCシステム</b> 構成内容：iMark本体、iMark Data Selectorソフトウェア、Microplate Manager 6ソフトウェア、ノートPC、USBケーブル、電源コード、取扱説明書	¥1,460,000	<b>¥780,000</b>	47%

## ImmunoWash1575 マイクロプレートウォッシャー

- ✓ 110プログラム保存可能
- ✓ 各社の96ウェルプレートにフィットする0.1mm単位でのニードル位置調整機能
- ✓ 8チャンネル/12チャンネル（オプション） マニホールド
- ✓ ポンプ内蔵式
- ✓ 界面活性剤を含むバッファーでの泡立ちを抑えた洗浄を可能にする  
滴下スピード調節機能“Flow設定”
- ✓ 液残りを削減するCrossWise洗浄機能
- ✓ WashしたいStrip数まで洗浄できるLastStrip機能

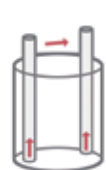

Crosswise機能

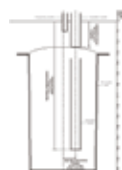

0.1mm単位で調節可能な  
ニードル位置調節



Last Strip機能



**39%  
OFF**

### Ordering Information

カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格	割引率
170-7009JA	<b>ImmunoWash1575 マイクロプレートウォッシャー</b> 構成内容：ImmunoWash1575本体、電源コード、ボトル (3)、メンテナンスキット、8チャンネルマニホールド、ボトルホルダー、取扱説明書	¥780,000	<b>¥476,000</b>	39%



お求めやすくなって登場！

## Gene Pulser Xcellシステム

- ✓ 1台で減衰波（エクスポネンシャルパルス）と矩形波（スクエアパルス）の両方を出力可能なため、細胞種を問わず幅広いターゲットに応用可能です
- ✓ バックライト付きディスプレイを搭載しており、簡便にプロトコルを選択したり、導入後の波形確認が行えます
- ✓ 哺乳類、微生物へのプリセットプログラムが登録されており、ご購入後すぐにご使用いただけます

Gene Pulser Xcellシステム選択ガイド

システム	キューベット	ターゲット
Gene Pulser Xcell コンプリートシステム	0.1cm/0.2cm/0.4cm	細菌、哺乳類など
Gene Pulser Xcell CEシステム	0.2cm/0.4cm	動物細胞
Gene Pulser Xcell PCシステム	0.1cm/0.2cm	細菌



## Ordering Information


カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格	割引率
165-2660J1	<b>Gene Pulser Xcell コンプリートシステム</b> 構成内容：Gene Xcell本体、CE module、PC module、ShockPod、エレクトロポレーションキューベット 0.1cm/0.2cm/0.4cm各50個、電源コード	¥1,450,000	<b>¥1,232,500</b>	15%
165-2661J1	<b>Gene Pulser Xcell CEシステム</b> 構成内容：Gene Xcell本体、CE module、ShockPod、エレクトロポレーションキューベット 0.2cm/0.4cm各50個、電源コード	¥1,050,000	<b>¥892,500</b>	15%
165-2662J1	<b>Gene Pulser Xcell PCシステム</b> 構成内容：Gene Xcell本体、PC module、ShockPod、エレクトロポレーションキューベット 0.1cm/0.2cm各50個、電源コード	¥950,000	<b>¥807,500</b>	15%

Gene Pulserシリーズ、MicroPulser用高品質キューベット

## エレクトロポレーションキューベット

- ✓ Gene Pulserシリーズ、MicroPulserに最適
- ✓ 正確な電極間距離、徹底された洗浄、堅固な構造により高い再現性
- ✓ 滅菌済で使いやすい個別包装

電極間距離	カタログ番号	色	主な対象
0.4cm	165-2088	空色	哺乳類/植物細胞
0.2cm	165-2086	緑色	バクテリア/酵母/哺乳類細胞
0.1cm	165-2089	茶色	バクテリア/酵母

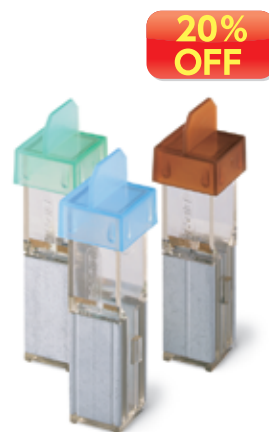

## Ordering Information

カタログ番号	品名	数量	通常価格	キャンペーン価格	割引率	¥/キューベット
165-2088	エレクトロポレーションキューベット 0.4cm (50)	50	¥24,800	<b>¥19,900</b>	20%	¥398
165-2086	エレクトロポレーションキューベット 0.2cm (50)	50	¥24,800	<b>¥19,900</b>	20%	¥398
165-2089	エレクトロポレーションキューベット 0.1cm (50)	50	¥24,800	<b>¥19,900</b>	20%	¥398
まとめ買いパッケージはさらにお得です。						
165-2088B05	エレクトロポレーションキューベット 0.4cm (50×5)	250	¥99,400			¥397
165-2086B05	エレクトロポレーションキューベット 0.2cm (50×5)	250	¥99,400			¥397
165-2089B05	エレクトロポレーションキューベット 0.1cm (50×5)	250	¥99,400			¥397
165-2091	エレクトロポレーションキューベット 0.4cm (500)	500	¥150,000			¥300
165-2092	エレクトロポレーションキューベット 0.2cm (500)	500	¥150,000			¥300
165-2093	エレクトロポレーションキューベット 0.1cm (500)	500	¥150,000			¥300
165-2091B05	エレクトロポレーションキューベット 0.4cm (500×5)	2,500	¥650,000			¥260
165-2092B05	エレクトロポレーションキューベット 0.2cm (500×5)	2,500	¥650,000			¥260
165-2093B05	エレクトロポレーションキューベット 0.1cm (500×5)	2,500	¥650,000			¥260
165-2091B10	エレクトロポレーションキューベット 0.4cm (500×10)	5,000	¥1,000,000			¥200
165-2092B10	エレクトロポレーションキューベット 0.2cm (500×10)	5,000	¥1,000,000			¥200
165-2093B10	エレクトロポレーションキューベット 0.1cm (500×10)	5,000	¥1,000,000			¥200

こちらの製品は  
キャンペーン対象外です。

カウンティングスライド600枚添付！

## TC20™全自動セルカウンター

36%  
OFF

✓ **カウンティングスライド600枚が添付**

キャンペーン期間中はカウンティングスライド600枚（145-0015B04）が付属します

✓ **オートフォーカス**

オートフォーカスによるOne-Step Countingにより  
簡単に測定可能。人的バラツキがないカウンティングを実現

✓ **トリパンブルーによる生細胞数カウンティング対応**

トリパンブルーによる生細胞数カウントに対応  
トリパンブルーのあるなしはTC20が自動検出してカウント

✓ **新機能：ゲート機能**

カウントする細胞径を指定して計測するゲート機能搭載

✓ **新機能：PCソフトウェアによる再解析・レポート出力**

TC20で測定した画像をUSBでPCに持ち込んで再解析することが可能  
専用ソフトウェア「TC20 Data Analyzerソフトウェア」は弊社ホームページより  
無償ダウンロード可能です



## One-Step Counting

## サンプル添加



スライド上にサンプルを10μl添加します。

## スライド挿入



スライドをTC20に挿入すると自動的にカウントが始まります。

## 結果表示




平均30秒以内で総細胞数または総生細胞数（トリパンブルー染色）を計測



システムテストスライドと  
サーマルプリンター



TC20：測定結果（Trypan Blue）  
総細胞数/生細胞数/生存率表示

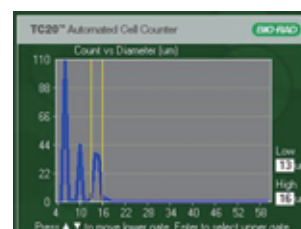

TC20：細胞サイズゲート機能

## Ordering Information

カタログ番号 品名

## TC20全自動セルカウンター

145-0101CAM TC20全自動セルカウンター

構成内容：TC20本体、1.5ml Trypan Blue、取扱説明書、カウンティングスライド30枚  
（2チャンバー；60サンプル）+ **カウンティングスライド600枚（2チャンバー；1200サンプル）**

キャンペーン  
期間中は増量！

通常価格

キャンペーン価格

割引率

¥658,000

¥420,000

36%

145-0109CAM TC20全自動セルカウンタープリンター付

構成内容：TC20本体、サーマルプリンター、1.5ml Trypan Blue、取扱説明書、  
カウンティングスライド30枚（2チャンバー；60サンプル）、  
**カウンティングスライド600枚（2チャンバー；1200サンプル）**

キャンペーン  
期間中は増量！

¥733,000

¥470,000

36%

## セルカウンター専用プリンター

145-0005JA サーマルプリンター

¥110,000

145-0007J プリンター用ラベル(500ラベル)

¥11,000

## キットと試薬

145-0003J1 カウンティングキット

構成内容：カウンティングスライド30枚（2チャンバー；60サンプル），1.5ml TC10 Trypan Blue

¥7,600

145-0021 Trypan Blue 5×1.5ml (750サンプル)

¥7,000

145-0022 Trypan Blue 10×1.5ml (1500サンプル)

¥10,000

145-0014 システムテストキット

¥50,000

## 専用消耗品

145-0015 カウンティングスライド 150枚

¥29,700

145-0015B02 カウンティングスライド 300枚

¥57,000

145-0015B04 カウンティングスライド 600枚

¥108,000

こちらの製品は  
キャンペーン対象外です。

※専用プリンター、キット、試薬並びに専用消耗品はTC10・TC20共通の製品になります。

新しい製品パッケージで新登場

# ワンプッシュゲル撮影装置 Gel Doc EZ

## 染色不要のTGX Stain Freeゲル対応トレイがもれなく添付

Stain Freeゲルは、染色色素による染色や固定操作をすることなくタンパク質を可視化できる新しい泳動パターン確認ツールです。

Stain Freeゲルにより定量性高いV3 Western Workflow™への対応が可能です。

V3 Western Workflowの詳細は<http://www.bio-rad.com/V3>へ

## 手軽なワンプッシュ撮影

本体中央の緑ボタンを押すだけの簡単撮影

## コンパクト

コンパクトサイズで省スペース化を実現

## 優れた画像クオリティと高い定量性


- ・特許技術 フラットフィールドニング機能により、ムラの無い定量性高い画像撮影が可能です
- ・高解像度（144万画素）カメラにより、近接したバンド解析に対応します
- ・エチプロなどのUV撮影から、CBBなどの可視染色まで幅広い染色剤にフレキシブルに対応します



## 撮影装置の違いによる画像クオリティ比較例

### Gel Doc EZ

#### 撮影画像例

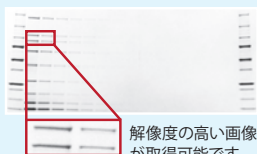

解像度の高い画像  
が取得可能です


#### バックグラウンド測定例



バックグラウンドが低く、画像全体にわた  
り均一なムラの無いデータ


### 他社同等製品

#### 撮影画像例

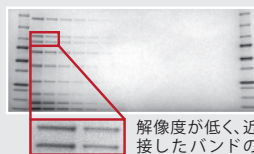

解像度が低く、近  
接したバンドの  
区別が難しくなり  
ます

#### バックグラウンド測定例

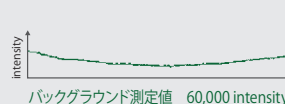

画像の中心と外側でバックグラウンドが  
不均一なデータ

※ Gel Doc EZでは、TGX Stain Freeゲルの検出、転写の確認、メンブレン上の総タンパク質量を定量し、レーン間のノーマライズを行うことが可能です。

※ Gel Doc EZは化学発光法によるメンブレンの検出や、落射光による蛍光検出を行うことはできません。

# ハイエンドゲル撮影装置 Gel Doc XR Plus

## 大きな撮影エリア

最大25.0×26.0 cmの撮影エリアを持ち、幅広いゲルサイズに対応

## ゲルの切り出しに対応

引き出し式UVトランスイルミネーターにより切り出しニーズに対応



## Ordering Information

カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格	割引率
170-8270J1PC	Gel Doc EZ PCシステム (Gel Doc EZ用Stain Freeトレイ付)	¥1,280,000	¥950,000	26%
170-8195J1PC	Gel Doc XR Plus Image Labシステム	¥1,980,000	¥1,386,000	30%
<b>Gel Doc EZ専用トレイ※</b>				
170-8271	Gel Doc EZ用 UVトレイ (透過UV光検出用)	¥100,000	¥75,000	25%
170-8272	Gel Doc EZ用 Whiteトレイ (透過白色光検出用)	¥100,000	¥75,000	25%
170-8273	Gel Doc EZ用 Blueトレイ (透過青色光検出用)	¥150,000	¥110,000	27%
<b>Gel Doc XR関連製品</b>				
170-8289	白色コンバージョンスクリーン	¥150,000	—	—
170-8183JA	XciteBlueコンバージョンスクリーン (SYBR用フィルター付)	¥250,000	—	—

※Gel Doc EZ PCシステムには、Stain Freeトレイのみ添付されています。Stain Freeゲル以外の検出には別途専用トレイが必要です。

**BIO-RAD**

バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社  
ライフサイエンス事業部

www.bio-rad.com

本 社 〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-24

大阪営業所 〒532-0025 大阪市淀川区新北野 1-14-11

福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-5-28

\* 学術的お問い合わせは TEL: 03-6404-0331 FAX: 03-6404-0334

TEL: 03-6361-7000 FAX: 03-5463-8480

TEL: 06-6308-6568 FAX: 06-6308-3064

TEL: 092-475-4856 FAX: 092-475-4858

取扱店

\* 価格（税抜き）、仕様などは予告無く変更することがありますので、ご了承ください。

\* 価格は2013年5月現在のものです。メーカー希望小売価格（税別）です。

\* 本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

C10522 1305A